

長時間心電図記録解析結果報告書

病院名：	記録器名：	WR-100	システム名称：	SCM-9000 (V93-04)	
病棟：	記録開始時間：	2025/08/13	13:50	解析装置名称：	SCM-9000 (V93-04)
科：	解析時間：	4d20h38min	再生日付：	2025/08/19	

患者情報


氏名：	ソウゴウ タロウ	年齢：	30 歳	身長：	cm
ID：	12345678	性別：	男	体重：	kg
住所：		電話：		BMI：	
				血圧：	/ mmHg

記録状態	不整脈	ST-T変化
☐ 良	上室期外収縮	☐ 無
☐ 不良	☐ 無	☐ 変化有り
	☐ 散発	
	☐ 頻発	
	☐ 連発	
	心室期外収縮	
	☐ 無	
	☐ 散発	
	☐ 頻発	
	☐ 連発	
	☐ R on T	
	上室性頻拍	
	☐ 無	
	☐ 有	
	心室頻拍	
	☐ 無	
	☐ 非持続性	
	☐ 持続性	
基本調律		その他
☐ 洞調律		
☐ 心房細・粗動		
☐ 心室調律		
☐ ペースメーカーリズム		
☐ その他		

目的	所見

技師1	:		医師	:	
技師2	:		判読医	:	

解析結果概要				2025/08/27	氏名: ソウゴウ タロウ	P2
				ID : 12345678		1/1頁
解析時間				2025/08/13 13:50:50	- 2025/08/18 10:34:19	(4d20h38min56s
心拍情報						
HR	最小	:	60 bpm	15/ 23:46:47		
	平均	:	79 bpm			
	最大	:	125 bpm	15/ 19:59:30		
総心拍数	:	539,274 beats	モフォロジー総数			
正常心拍	(N)	:	537,337 beats	(99.641 %)	1 個	
上室期外収縮	(S)	:	597 beats	(0.111 %)	2 個	
心室期外収縮	(V)	:	1,340 beats	(0.248 %)	3 個	
ペース心拍	(P)	:	0 beats	(0.000 %)	0 個	
フュージョン	(F)	:	0 beats	(0.000 %)	0 個	
その他の心拍	(Q)	:	0 beats	(0.000 %)	0 個	
脚ブロック	(B)	:	0 beats	(0.000 %)	0 個	
補充収縮	(E)	:	0 beats	(0.000 %)	0 個	
変行伝導	(@)	:	0 beats	(0.000 %)	0 個	
WPW	(W)	:	0 beats	(0.000 %)	0 個	
ユーザ定義1	(X)	:	0 beats	(0.000 %)	0 個	
不整脈情報						
心室性不整脈		検出回数		最大値		時刻
VT(持続性)		0				
VT(非持続性)		0				
V連発		0				
V2連発		0				
R on T (<= 250 ms)		0				
V2段脈		5		7 beats		14/ 20:07:07
V3段脈		2		7 beats		13/ 14:55:33
V単発		1,318		304 ms		15/ 7:39:29
上室性不整脈		検出回数		最大値		時刻
ポーズ (>= 2.5 s)		0				
SVT		3		6 beats (169 bpm)		17/ 20:19:48
				170 bpm (3 beats)		15/ 19:47:18
S連発		22		19 beats (117 bpm)		18/ 2:08:54
				158 bpm (4 beats)		14/ 7:42:00
S2連発		22				
S単発 (<= 70 %)		416		40 %		16/ 13:08:43
頻脈 (>= 180)		0				
徐脈 (<= 30)		0				
心房細動:		0 個				
総雑音時間 ch.1 : 4 s						
患者イベント数: 1 最大R-R間隔: 1.51s						

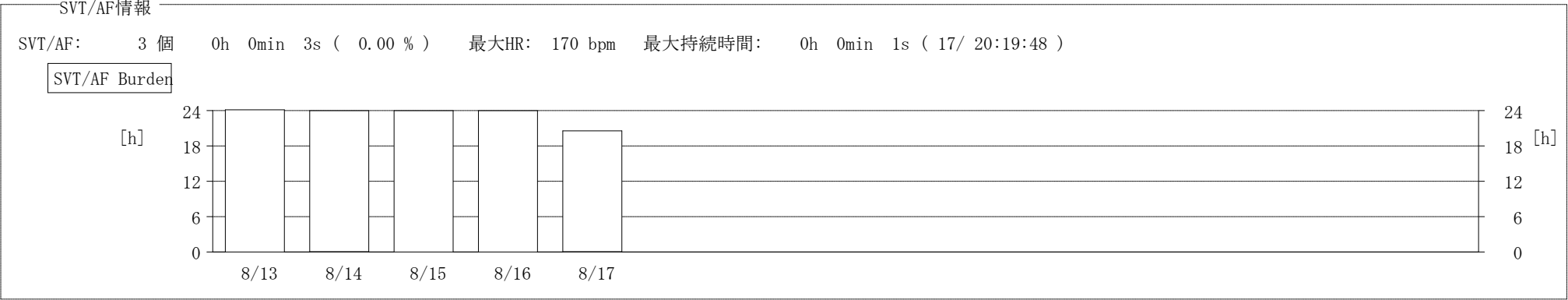

不整脈発生表										2025/08/27		氏名： ソウゴウ タロウ		P3						
										ID ： 12345678				1/5頁						
										解析時間		2025/08/13 13:50:50		-		2025/08/18 10:34:19		(4d20h38min56s)		
日時	HR [bpm]			総数 [beats]	ビート数 [beats]	心室性						上室性								
8/13	最小	平均	最大			VT (持続性)	(非持続性)	V連発	V2連発	R on T	V2段脈	V3段脈	V単発	ビート数 [beats]	ポーズ	SVT	S連発	S2連発	S単発	心房細動 [s]
13:50	73	76	104	672	6							6	6				1	4	0	
14:00	71	89	119	5,238	55						1	52	3					3	0	
15:00	80	98	117	5,813	51						1	48	4					4	0	
16:00	73	82	102	4,914	28							28	3					3	0	
17:00	72	86	122	5,074	14							14	3					3	0	
18:00	71	83	101	4,930	22							22	6			1	1	1	0	
19:00	71	80	112	4,752	19							19	1					1	0	
20:00	71	84	114	4,932	13							13	4					4	0	
21:00	70	90	116	5,297	22							22	3					3	0	
22:00	66	73	97	4,352	11							11	3					3	0	
23:00	64	72	89	4,290	4							4	2					2	0	
0:00	61	67	82	4,008	4							4	3					3	0	
1:00	66	71	84	4,245	1							1	3					3	0	
2:00	64	71	92	4,248	3							3	3					3	0	
3:00	65	68	75	4,098	0								1					1	0	
4:00	64	68	83	4,072	0								5					5	0	
5:00	63	73	106	4,346	4							4	13				1	11	0	
6:00	65	70	89	4,184	1							1	6				1	4	0	
7:00	65	79	101	4,694	4							4	13			1	2	5	0	
8:00	76	94	118	5,529	22							22	2					2	0	
9:00	77	100	122	5,870	24							24	6				1	4	0	
10:00	63	70	84	4,189	0								7				1	5	0	
11:00	62	65	81	3,908	1							1	7					7	0	
12:00	69	82	96	4,927	28							28	3					3	0	
13:00	72	79	100	4,707	7							7	5					5	0	
総計	61	80	122	113,289	344							2	338	115			2	8	92	0

注) 表中の値は各イベント数を表しています。

解析時間

2025/08/13 13:50:50

-

2025/08/18 10:34:19

(

4d20h38min56s

)

日時 8/14	HR [bpm]			総数 [beats]	ビート数 [beats]	心室性						上室性							
	最小	平均	最大			VT (持続性) (非持続性)		V連発	V2連発	R on T	V2段脈	V3段脈	V単発	ビート数 [beats]	ポーズ	SVT	S連発	S2連発	S単発
14:00	68	78	101	4,629	9							9	4			1		1	0
15:00	67	71	89	4,232	0								5					5	0
16:00	69	77	96	4,567	3							3	3					3	0
17:00	75	82	94	4,934	6							6	0						0
18:00	75	84	105	5,035	20							20	3					3	0
19:00	83	101	120	5,992	76					2		70	0						0
20:00	78	92	120	5,450	32					1		28	2					2	0
21:00	72	95	119	5,554	6							6	2					2	0
22:00	66	72	94	4,269	4							4	1					1	0
23:00	61	67	92	3,992	1							1	6			1		4	0
0:00	61	67	80	4,010	0								5			1		2	0
1:00	63	69	92	4,127	2							2	7					7	0
2:00	62	68	82	4,056	0								3					3	0
3:00	63	68	82	4,120	0								1					1	0
4:00	61	66	90	3,941	1							1	2					2	0
5:00	63	69	86	4,139	1							1	0						0
6:00	66	71	93	4,241	0								17			1		8	0
7:00	66	83	102	4,916	16							16	1					1	0
8:00	75	92	110	5,459	22							22	5		1				0
9:00	72	79	98	4,741	10							10	19			1	1	3	0
10:00	64	72	87	4,331	0								9			1		5	0
11:00	63	71	102	4,192	2							2	21			2		8	0
12:00	70	83	100	4,929	16							16	4				1	2	0
13:00	69	74	94	4,429	10							10	4					4	0
総計	61	78	120	110,285	237					3		227	124		1	7	3	67	0

注) 表中の値は各イベント数を表しています。

解析時間

2025/08/13 13:50:50

-

2025/08/18 10:34:19

(

4d20h38min56s

)

日時 8/15	HR [bpm]			総数 [beats]	ビート数 [beats]	心室性						上室性							
	最小	平均	最大			VT (持続性)	VT (非持続性)	V連発	V2連発	R on T	V2段脈	V3段脈	V単発	ビート数 [beats]	ポーズ	SVT	S連発	S2連発	S単発
14:00	66	71	98	4,255	3							3	7					7	0
15:00	65	68	73	4,116	1							1	3					3	0
16:00	65	75	86	4,461	1							1	2			1			0
17:00	76	85	105	5,073	27					1		24	3					3	0
18:00	83	92	107	5,476	62							62	7		1			1	0
19:00	82	94	125	5,604	48							48	5		1			2	0
20:00	72	89	121	5,233	24							24	2					2	0
21:00	70	93	117	5,460	23							23	2					2	0
22:00	64	70	91	4,196	5							5	4					4	0
23:00	60	68	91	4,033	11							11	3					3	0
0:00	61	67	89	3,993	6							6	8					8	0
1:00	62	67	87	4,032	5							5	4					4	0
2:00	60	66	85	3,960	1							1	9				2	5	0
3:00	61	64	81	3,831	0								7					7	0
4:00	61	65	90	3,889	1							1	6					6	0
5:00	61	74	102	4,357	11							11	5					5	0
6:00	61	64	84	3,856	0								7			1		5	0
7:00	63	79	102	4,690	13							13	4					4	0
8:00	76	91	115	5,391	25							25	3					3	0
9:00	64	72	84	4,302	0								3					3	0
10:00	61	67	89	4,031	0								5					5	0
11:00	65	79	97	4,722	8							8	6			1		4	0
12:00	71	80	97	4,768	22							22	1					1	0
13:00	68	73	88	4,358	0								4					4	0
総計	60	77	125	108,087	297					1		294	110		1	1	5	91	0

注) 表中の値は各イベント数を表しています。

解析時間

2025/08/13 13:50:50

-

2025/08/18 10:34:19

(

4d20h38min56s

)

日時 8/16	HR [bpm]			総数 [beats]	ビート数 [beats]	心室性						上室性							
	最小	平均	最大			VT (持続性) (非持続性)		V連発	V2連発	R on T	V2段脈	V3段脈	V単発	ビート数 [beats]	ポーズ	SVT	S連発	S2連発	S単発
14:00	69	85	104	5,038	7							7	4					4	0
15:00	70	78	101	4,644	0								2					2	0
16:00	63	76	92	4,512	12							12	8					8	0
17:00	64	82	101	4,859	17							17	1					1	0
18:00	75	85	106	5,089	18							18	3					3	0
19:00	67	77	99	4,598	22							22	2					2	0
20:00	66	83	104	4,924	12							12	5					5	0
21:00	66	75	95	4,480	2							2	4					4	0
22:00	65	73	88	4,340	9							9	2					2	0
23:00	61	70	88	4,200	8							8	6		1			3	0
0:00	61	67	88	4,011	0								7				1	5	0
1:00	65	70	89	4,173	3							3	7					7	0
2:00	64	69	92	4,130	1							1	9			1	1	4	0
3:00	65	69	88	4,129	0								6				1	4	0
4:00	64	68	89	4,100	0								9		1			6	0
5:00	64	74	97	4,375	5							5	11		1	1		5	0
6:00	66	69	91	4,122	0								3					3	0
7:00	67	81	100	4,811	7							7	9		1			6	0
8:00	80	100	117	5,896	50							50	1					1	0
9:00	75	81	93	4,859	3							3	3					3	0
10:00	65	74	91	4,428	0								5			1		3	0
11:00	64	71	95	4,219	5							5	4					4	0
12:00	72	82	104	4,894	6							6	5					5	0
13:00	72	86	103	5,112	12							12	2					2	0
総計	61	78	117	109,943	199							199	118			5	5	92	0

注) 表中の値は各イベント数を表しています。

不整脈発生表										2025/08/27		氏名： ソウゴウ タロウ		P7					
										ID ： 12345678				5/5頁					
										解析時間		2025/08/13 13:50:50		-		2025/08/18 10:34:19		(4d20h38min56s)	
日時	HR [bpm]			総数 [beats]	ビート数 [beats]	心室性						上室性							
8/17	最小	平均	最大			VT (持続性)	(非持続性)	V連発	V2連発	R on T	V2段脈	V3段脈	V単発	ビート数 [beats]	ポーズ	SVT	S連発	S2連発	S単発
14:00	68	75	93	4,497	0							2						2	0
15:00	69	84	100	4,995	17							17	7		1			2	0
16:00	77	85	97	5,063	14							14	3					3	0
17:00	76	84	102	5,020	16							16	1					1	0
18:00	80	95	111	5,650	66							66	0						0
19:00	79	101	120	5,908	38					1		35	1					1	0
20:00	76	100	122	5,889	21							21	8		1			2	0
21:00	70	82	108	4,862	15							15	4					4	0
22:00	63	72	91	4,316	13							13	8					8	0
23:00	60	65	75	3,880	0								11			1		8	0
0:00	61	69	88	4,109	0								3					3	0
1:00	62	69	85	4,145	1							1	17			2	1	4	0
2:00	64	71	97	4,246	1							1	28			2		4	0
3:00	64	69	79	4,173	0								5					5	0
4:00	63	69	91	4,163	2							2	11			1		6	0
5:00	64	77	98	4,547	7							7	4					4	0
6:00	63	69	89	4,109	1							1	4					4	0
7:00	64	82	111	4,836	9							9	5					5	0
8:00	78	88	116	5,247	24							24	1					1	0
9:00	73	92	112	5,470	17							17	3					3	0
10:00	68	75	100	2,545	1							1	4					4	0
10:34																			
総計	60	75	122	97,670	263					1		260	130		1	7	1	74	0

注) 表中の値は各イベント数を表しています。

不整脈ヒストグラム

2025/08/27

氏名: ソウゴウ タロウ

P8


ID : 12345678

1/15頁

解析時間 2025/08/13 13:50:50 - 2025/08/18 10:34:19 (4d20h38min56s)


心室期外収縮

総数 : 344 beats (0.304 %)

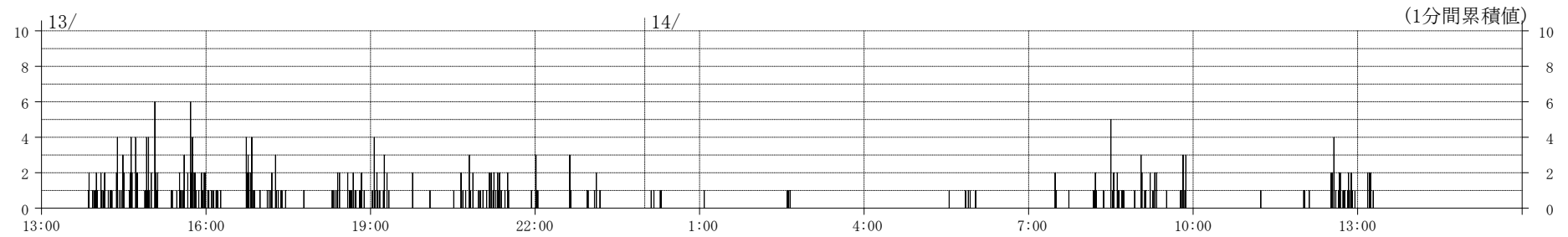


上室期外収縮

総数 : 115 beats (0.102 %)

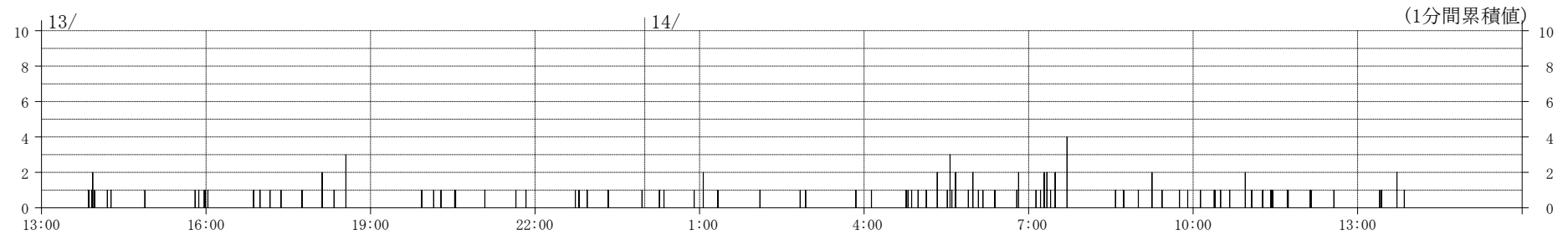


HR

最小: 61 bpm (14/ 0:38:33) 最大: 122 bpm (13/ 17:10:20) 平均: 80 bpm

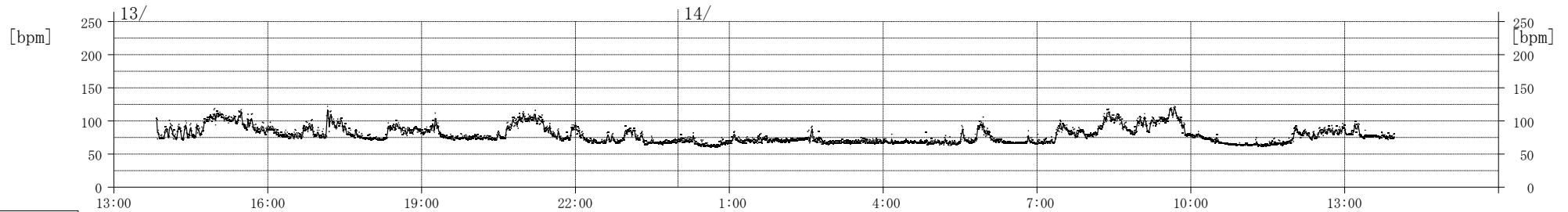

心房細動

イベント数: 0 総持続時間: 0s (0.00 %) 最大HR: bpm

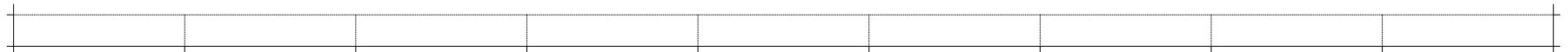


雑音

ch. 1

ch. 2


ch. 3

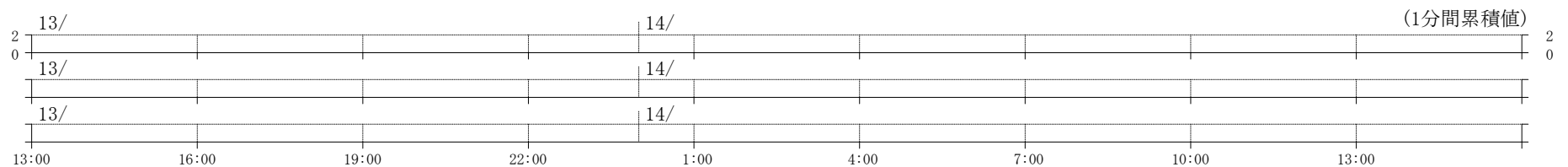

P9

2/15頁

解析時間 2025/08/13 13:50:50 - 2025/08/18 10:34:19 (4d20h38min56s)

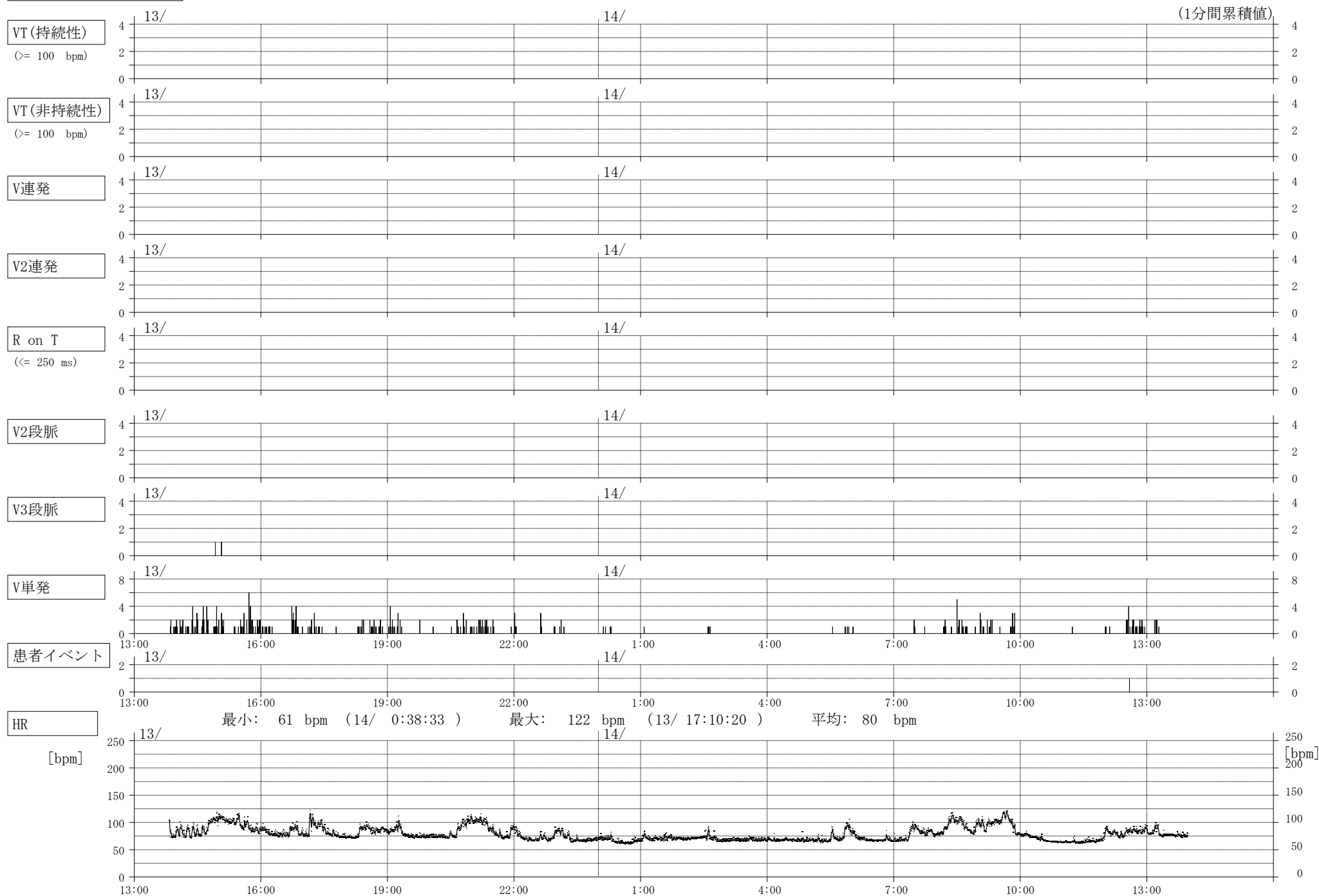

不整脈ヒストグラム

2025/08/27

氏名: ソウゴウ タロウ


P10

ID : 12345678

3/15頁

上室性不整脈イベント

解析時間 2025/08/13 13:50:50 - 2025/08/18 10:34:19 (4d20h38min56s)

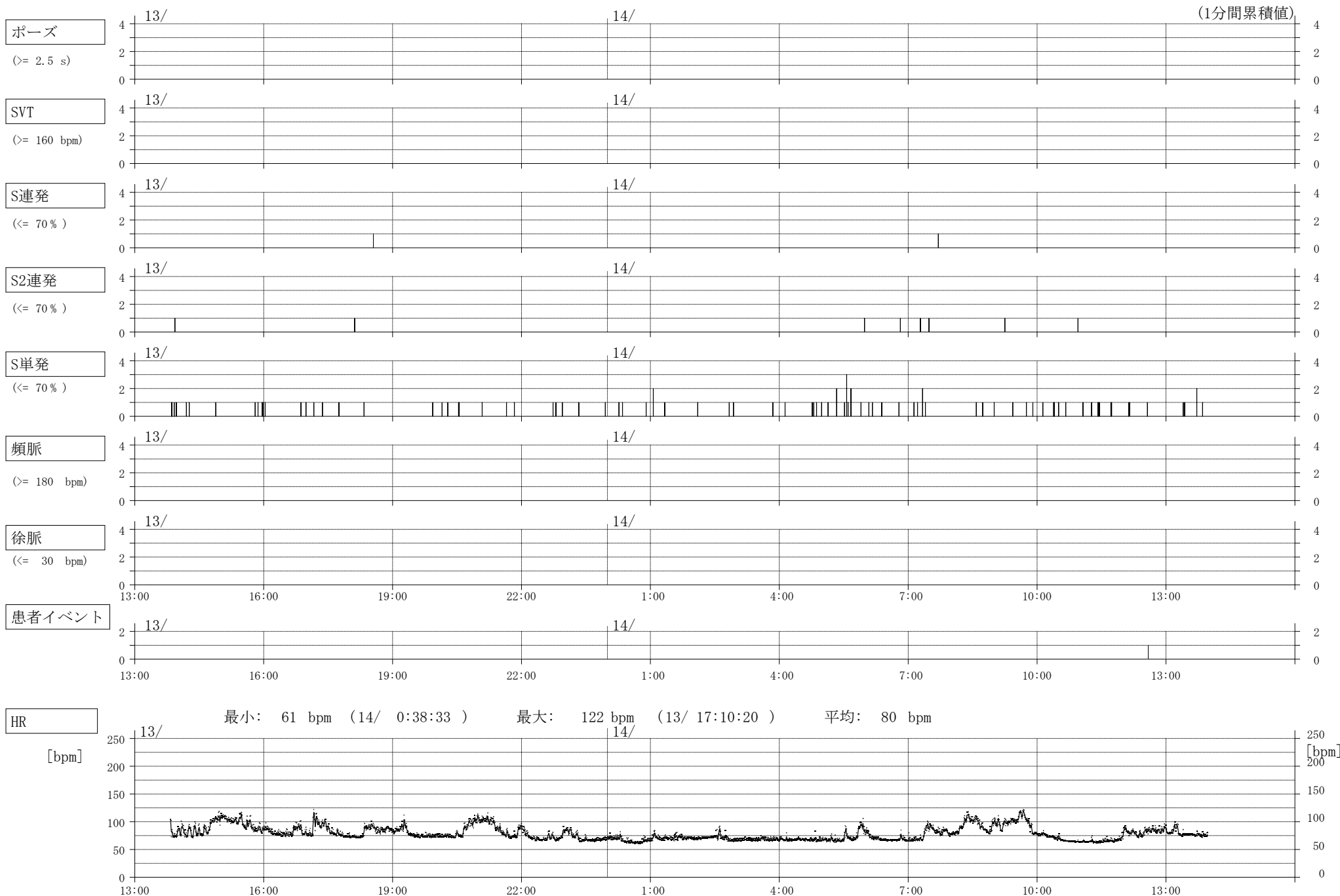

不整脈ヒストグラム

2025/08/27

氏名: ソウゴウ タロウ

P11


ID : 12345678

4/15頁

解析時間 2025/08/13 13:50:50 - 2025/08/18 10:34:19 (4d20h38min56s)


心室期外収縮

総数 : 237 beats (0.215 %)

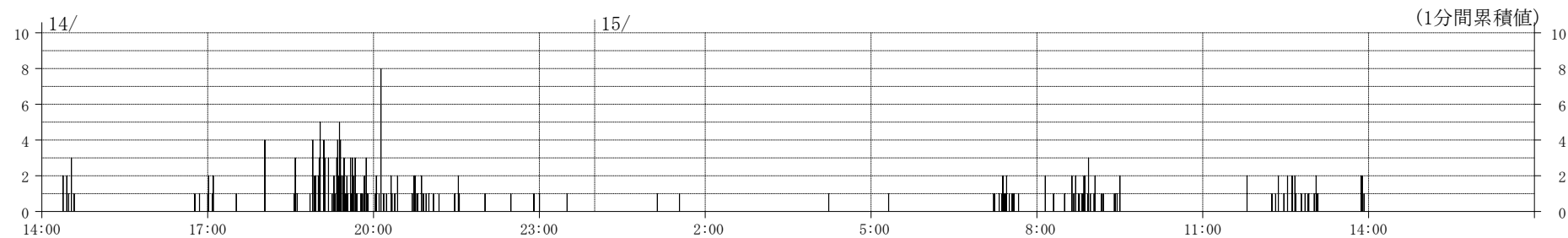


上室期外収縮

総数 : 124 beats (0.112 %)

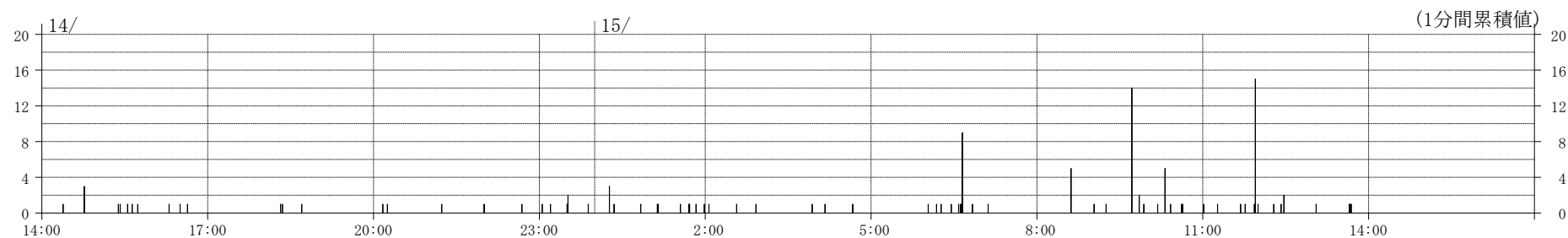


HR

最小: 61 bpm (14/ 23:25:04) 最大: 120 bpm (14/ 19:13:32) 平均: 78 bpm

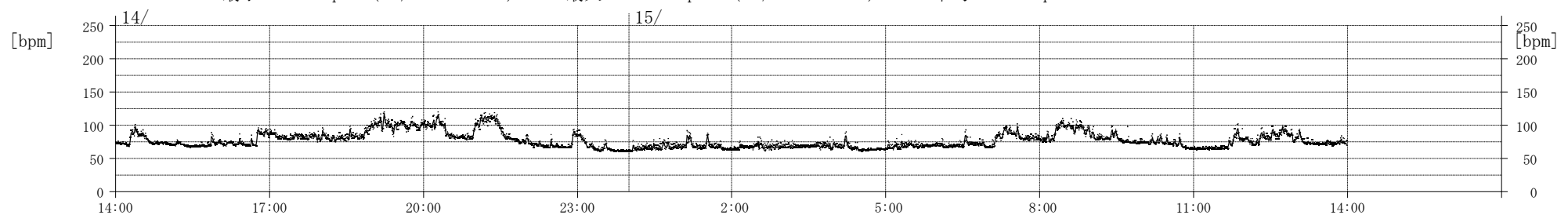

心房細動

イベント数: 0 総持続時間: 0s (0.00 %) 最大HR: bpm

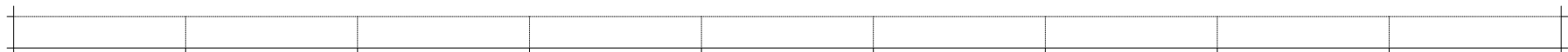


雑音

ch. 1

ch. 2

ch. 3

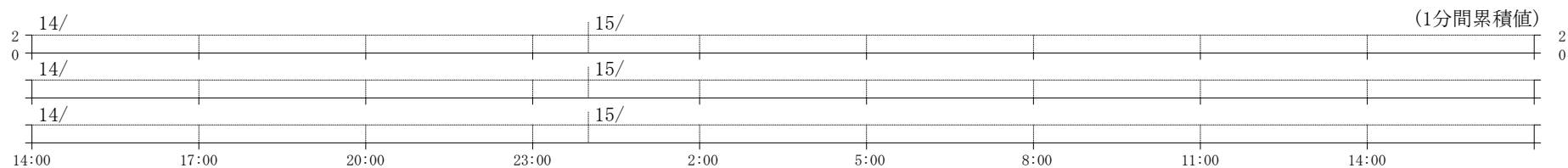

不整脈ヒストグラム

2025/08/27

氏名: ソウゴウ タロウ

P12

ID : 12345678


5/15頁

心室性不整脈イベント

解析時間 2025/08/13 13:50:50 - 2025/08/18 10:34:19 (4d20h38min56s)


VT(持続性)

(>= 100 bpm)

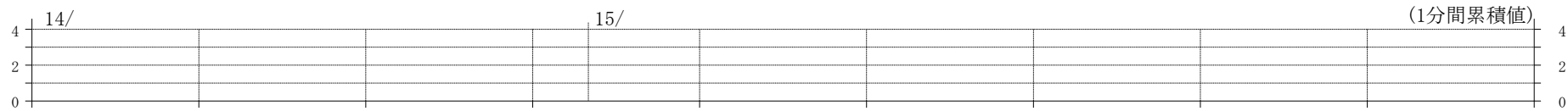


VT(非持続性)


(>= 100 bpm)

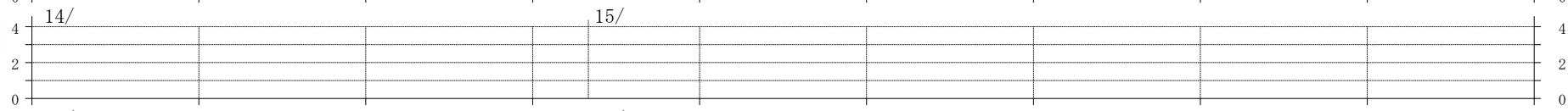

V連発

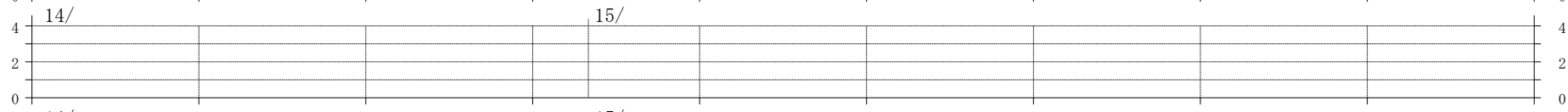


V2連発

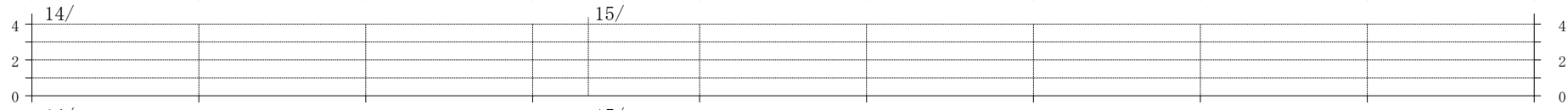


R on T


(<= 250 ms)

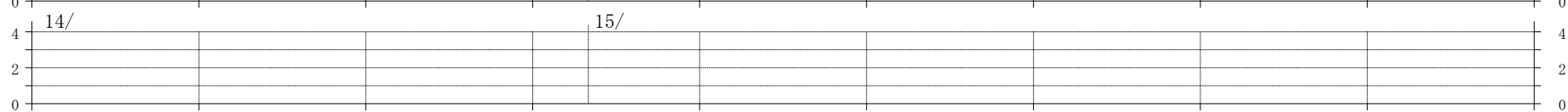


V2段脈

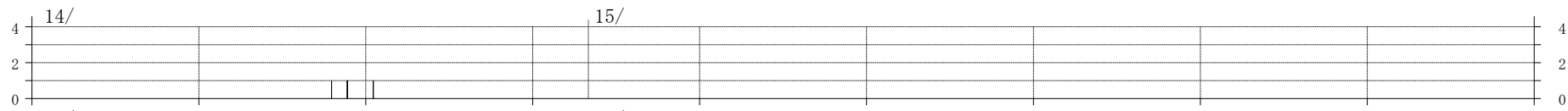


V3段脈

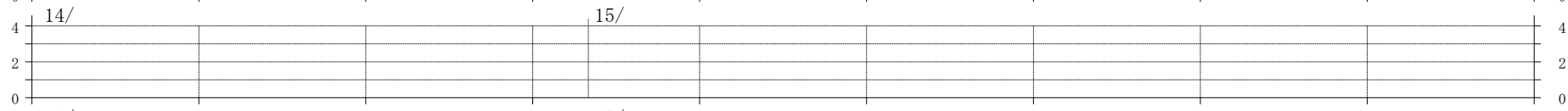

V単発

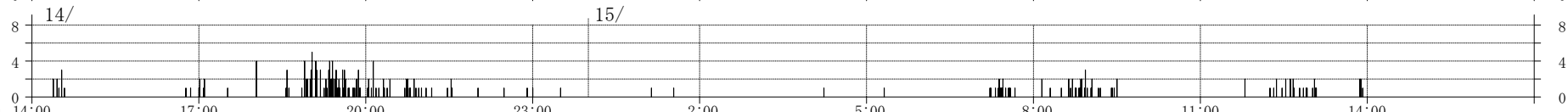


患者イベント

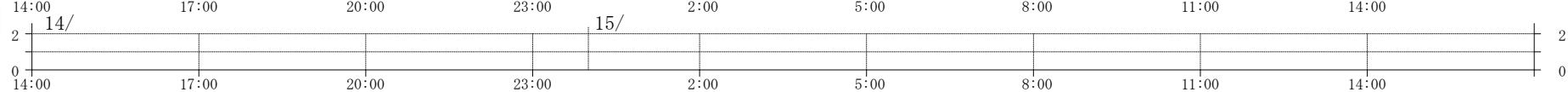

HR

[bpm]

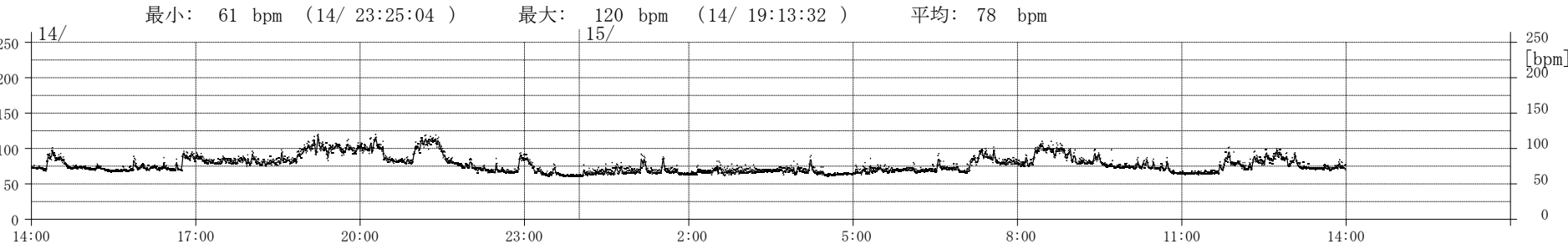

不整脈ヒストグラム

2025/08/27

氏名: ソウゴウ タロウ


P13

ID : 12345678

6/15頁

上室性不整脈イベント

解析時間 2025/08/13 13:50:50 - 2025/08/18 10:34:19 (4d20h38min56s)

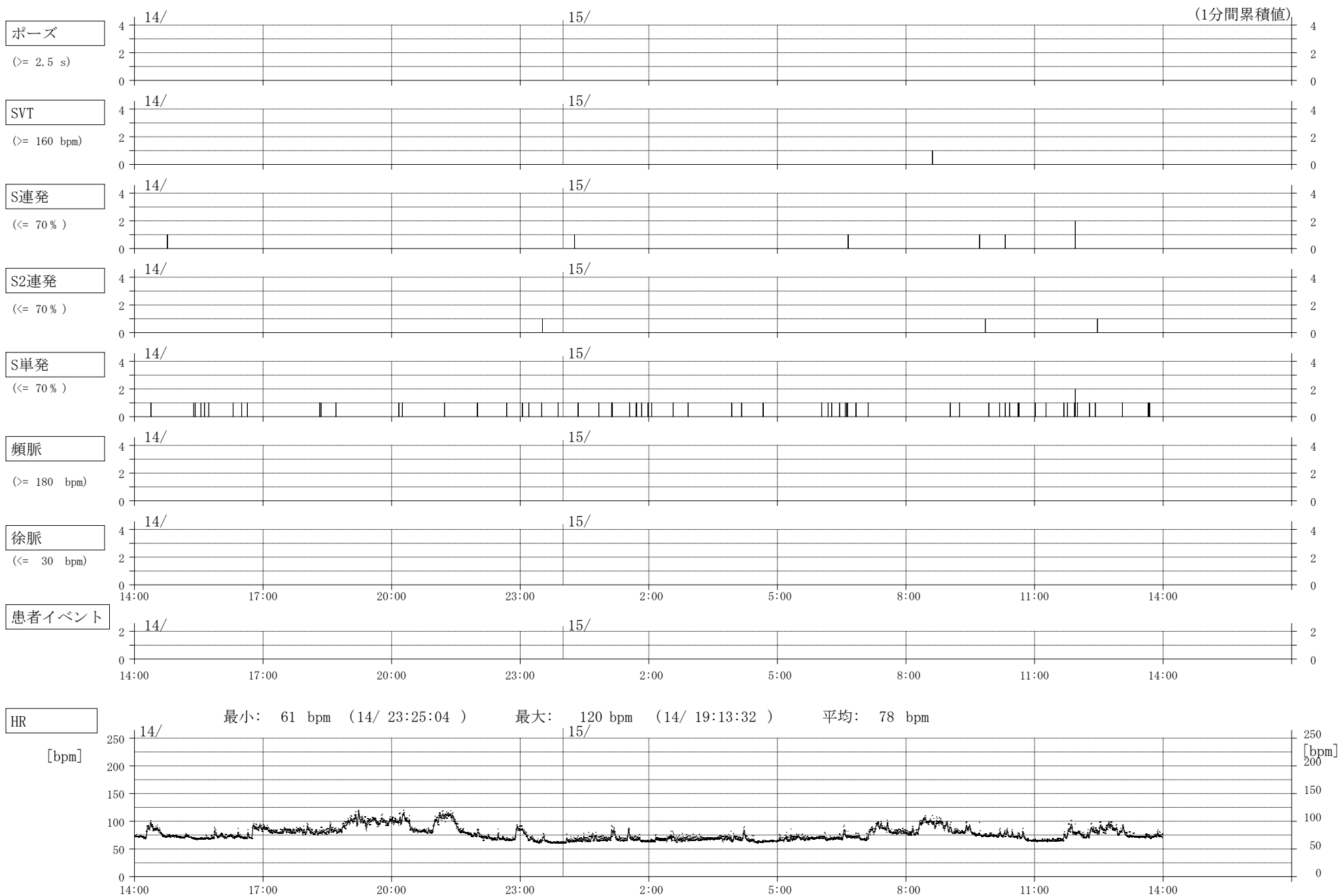

不整脈ヒストグラム

2025/08/27

氏名: ソウゴウ タロウ

P14


ID : 12345678

7/15頁

解析時間 2025/08/13 13:50:50 - 2025/08/18 10:34:19 (4d20h38min56s)


心室期外収縮

総数 : 297 beats (0.275 %)

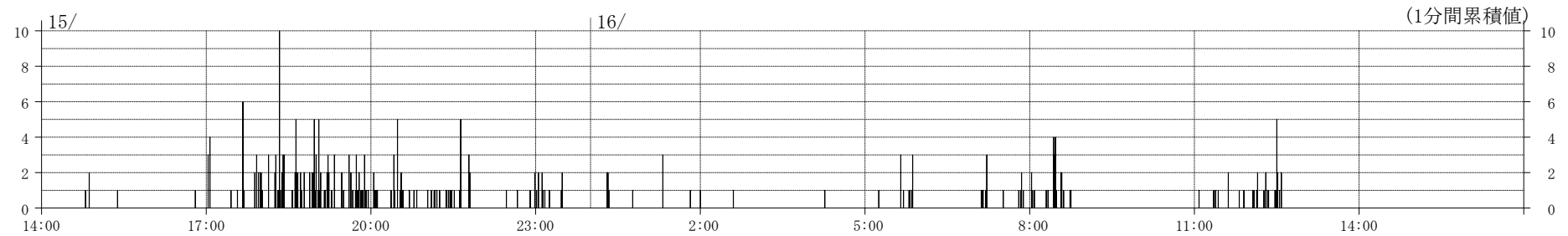


上室期外収縮

総数 : 110 beats (0.102 %)

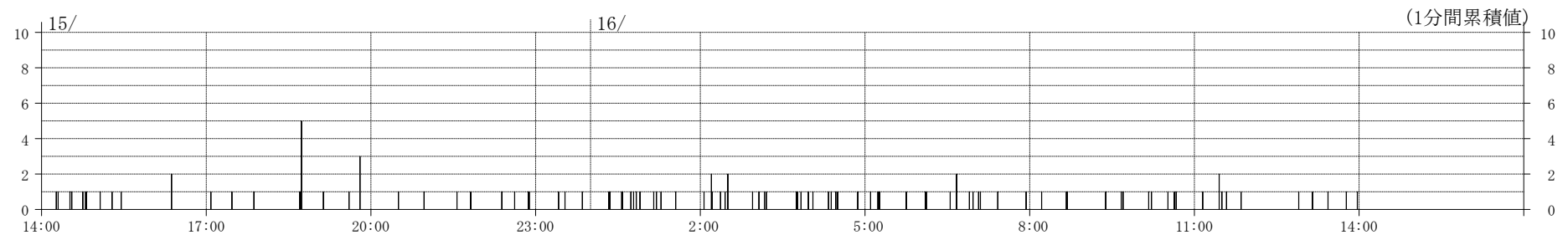


HR

最小: 60 bpm (15/ 23:46:47) 最大: 125 bpm (15/ 19:59:30) 平均: 77 bpm

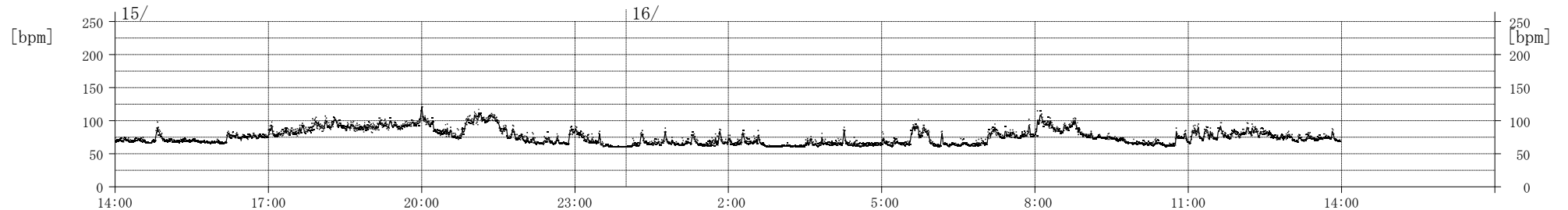

心房細動

イベント数: 0 総持続時間: 0s (0.00 %) 最大HR: bpm

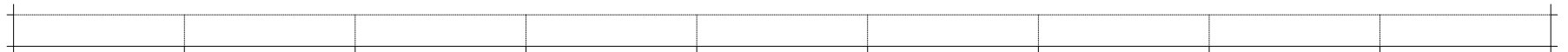


雑音

ch. 1

ch. 2

ch. 3

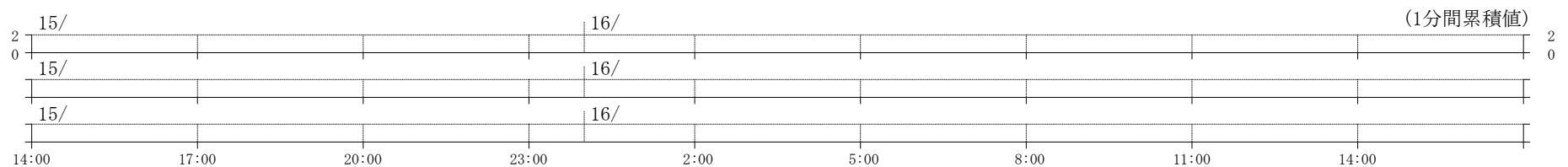

不整脈ヒストグラム

2025/08/27

氏名: ソウゴウ タロウ


P15

ID : 12345678

8/15頁

心室性不整脈イベント

解析時間 2025/08/13 13:50:50 - 2025/08/18 10:34:19 (4d20h38min56s)

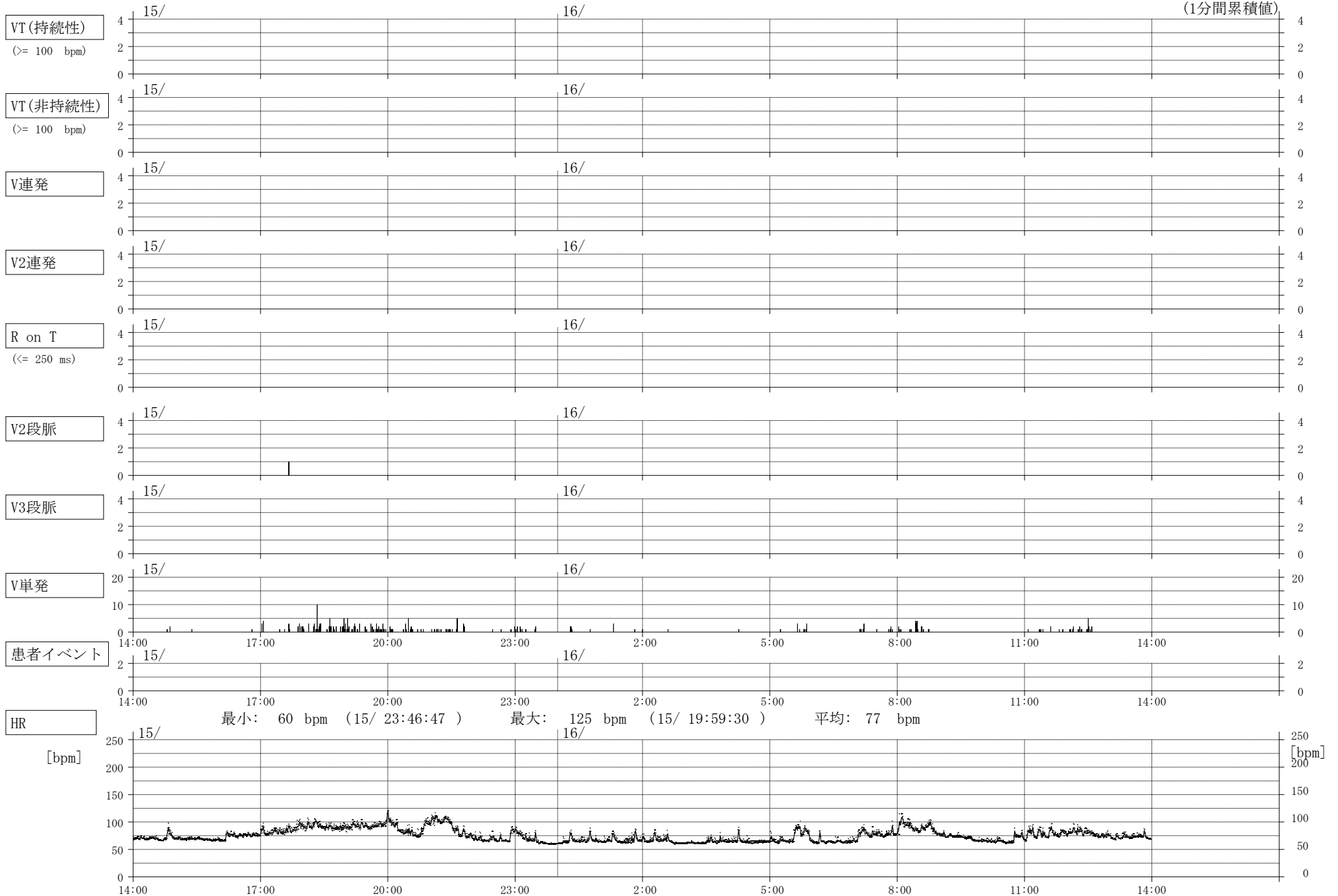

不整脈ヒストグラム

2025/08/27

氏名: ソウゴウ タロウ


P16

ID : 12345678

9/15頁

上室性不整脈イベント

解析時間 2025/08/13 13:50:50 - 2025/08/18 10:34:19 (4d20h38min56s)

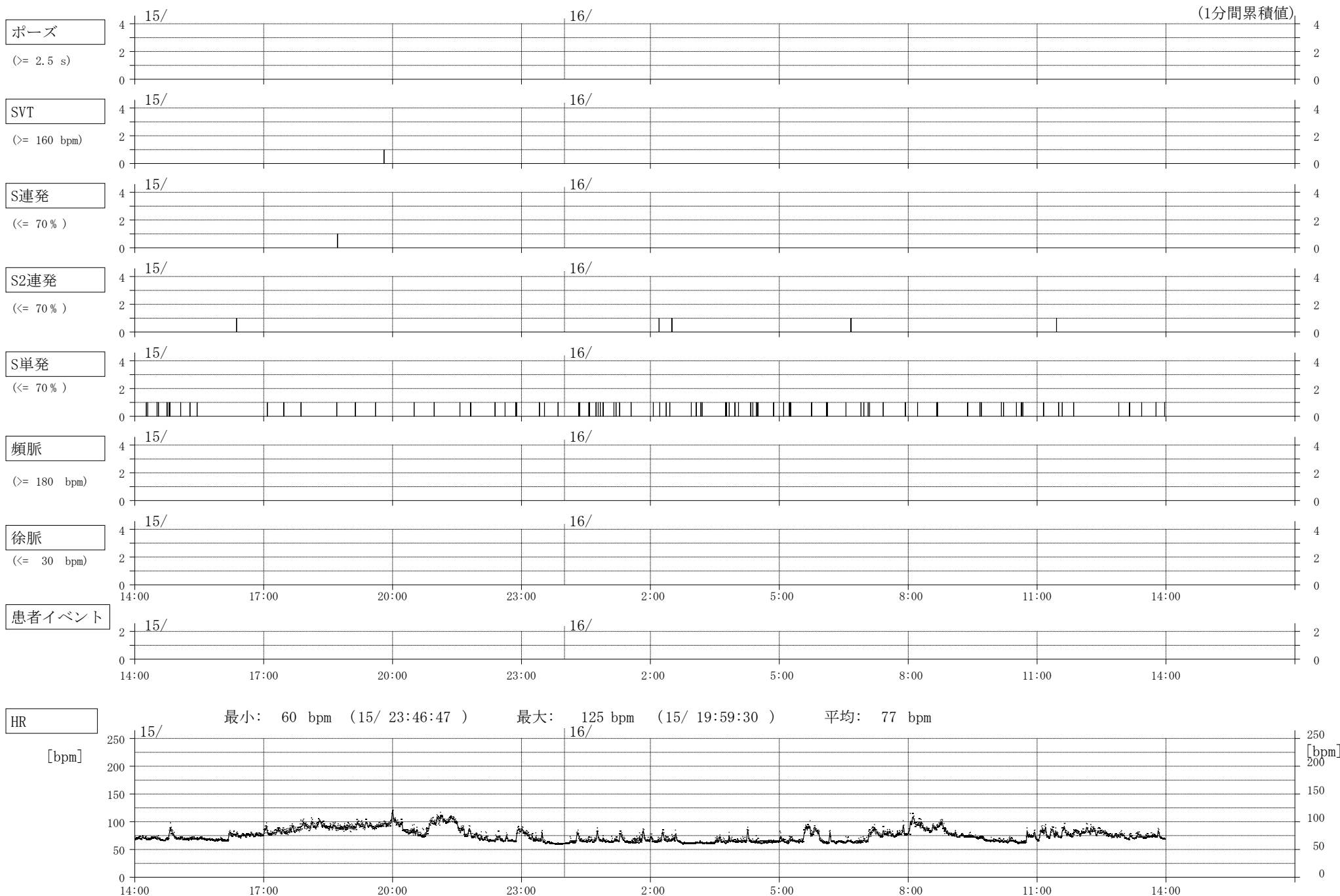

不整脈ヒストグラム

2025/08/27

氏名: ソウゴウ タロウ

P17


ID : 12345678

10/15頁

解析時間 2025/08/13 13:50:50 - 2025/08/18 10:34:19 (4d20h38min56s)


心室期外収縮

総数 : 199 beats (0.181 %)

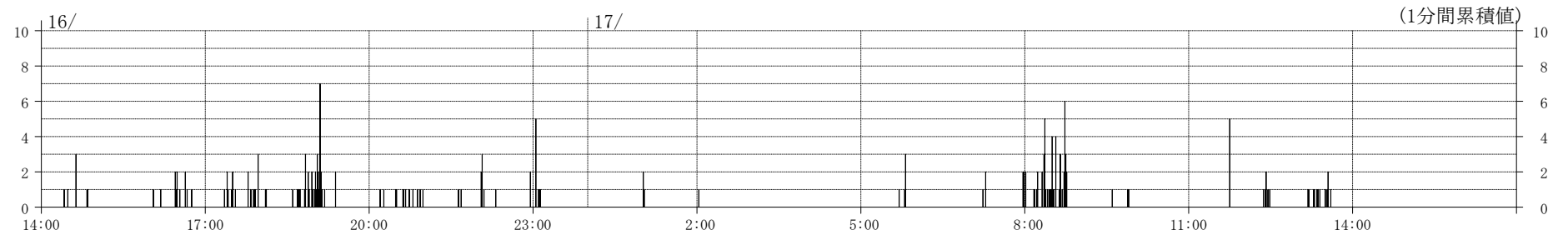


上室期外収縮

総数 : 118 beats (0.107 %)

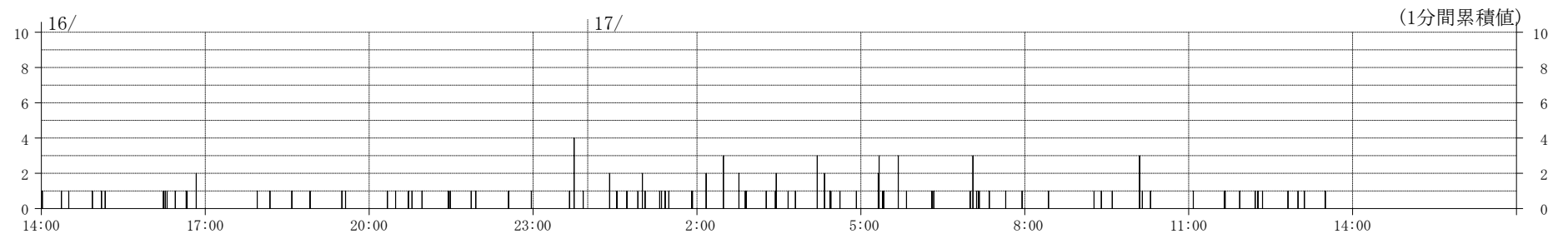


HR

最小: 61 bpm (16/ 23:52:31) 最大: 117 bpm (17/ 8:19:05) 平均: 78 bpm

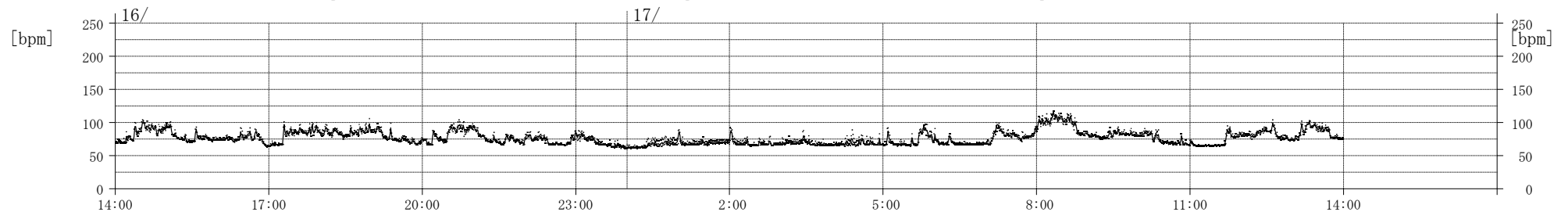

心房細動

イベント数: 0 総持続時間: 0s (0.00 %) 最大HR: bpm

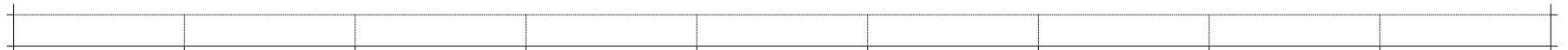


雑音

ch. 1

ch. 2

ch. 3

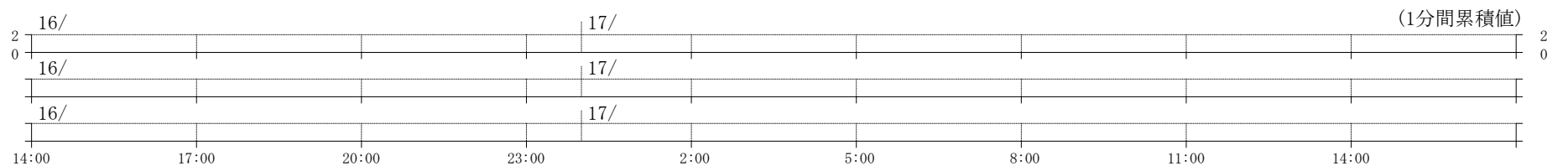

不整脈ヒストグラム

2025/08/27

氏名: ソウゴウ タロウ


P18

ID : 12345678

11/15頁

心室性不整脈イベント

解析時間 2025/08/13 13:50:50 - 2025/08/18 10:34:19 (4d20h38min56s)

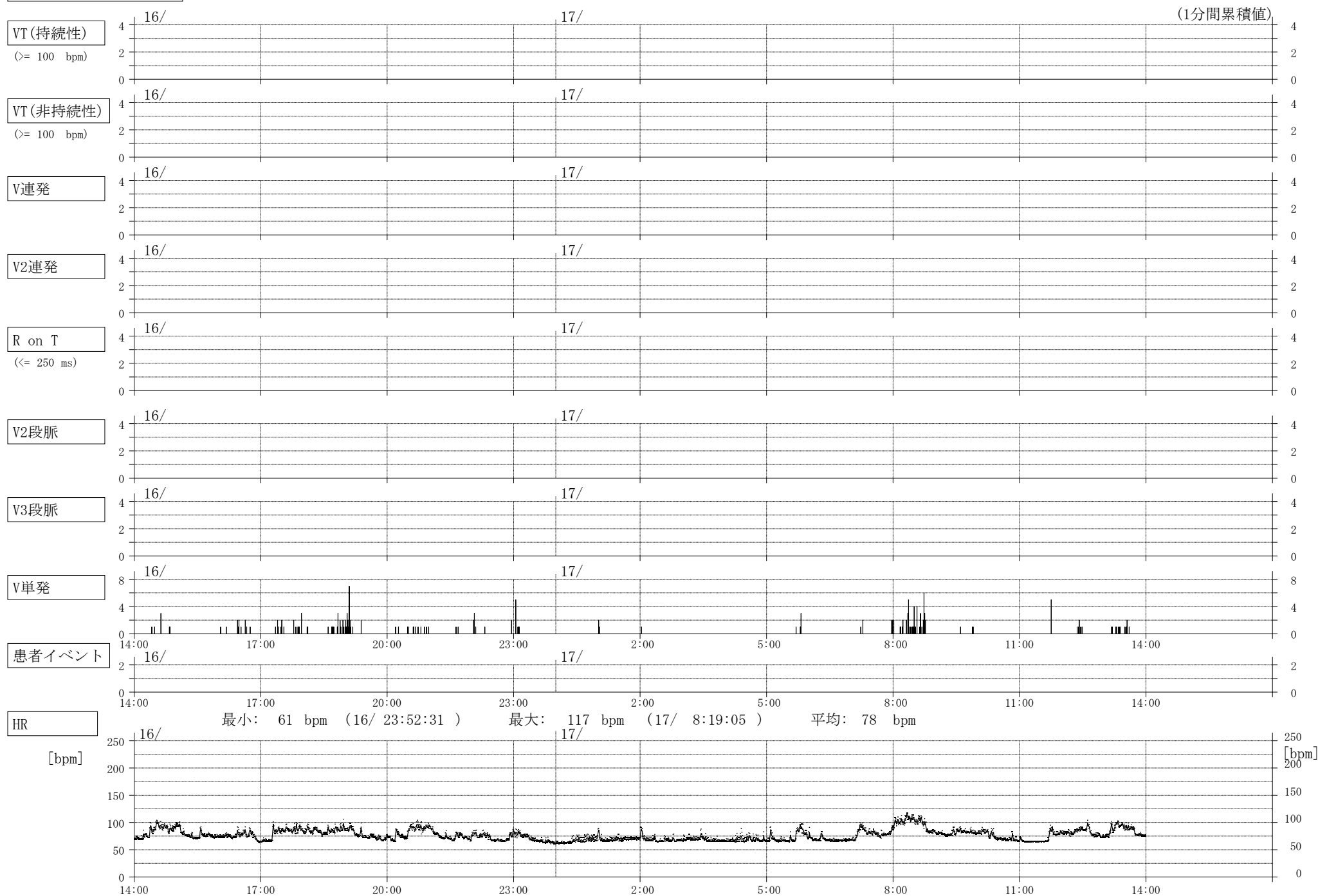

不整脈ヒストグラム

2025/08/27

氏名: ソウゴウ タロウ


P19

ID : 12345678

12/15頁

上室性不整脈イベント

解析時間 2025/08/13 13:50:50 - 2025/08/18 10:34:19 (4d20h38min56s)

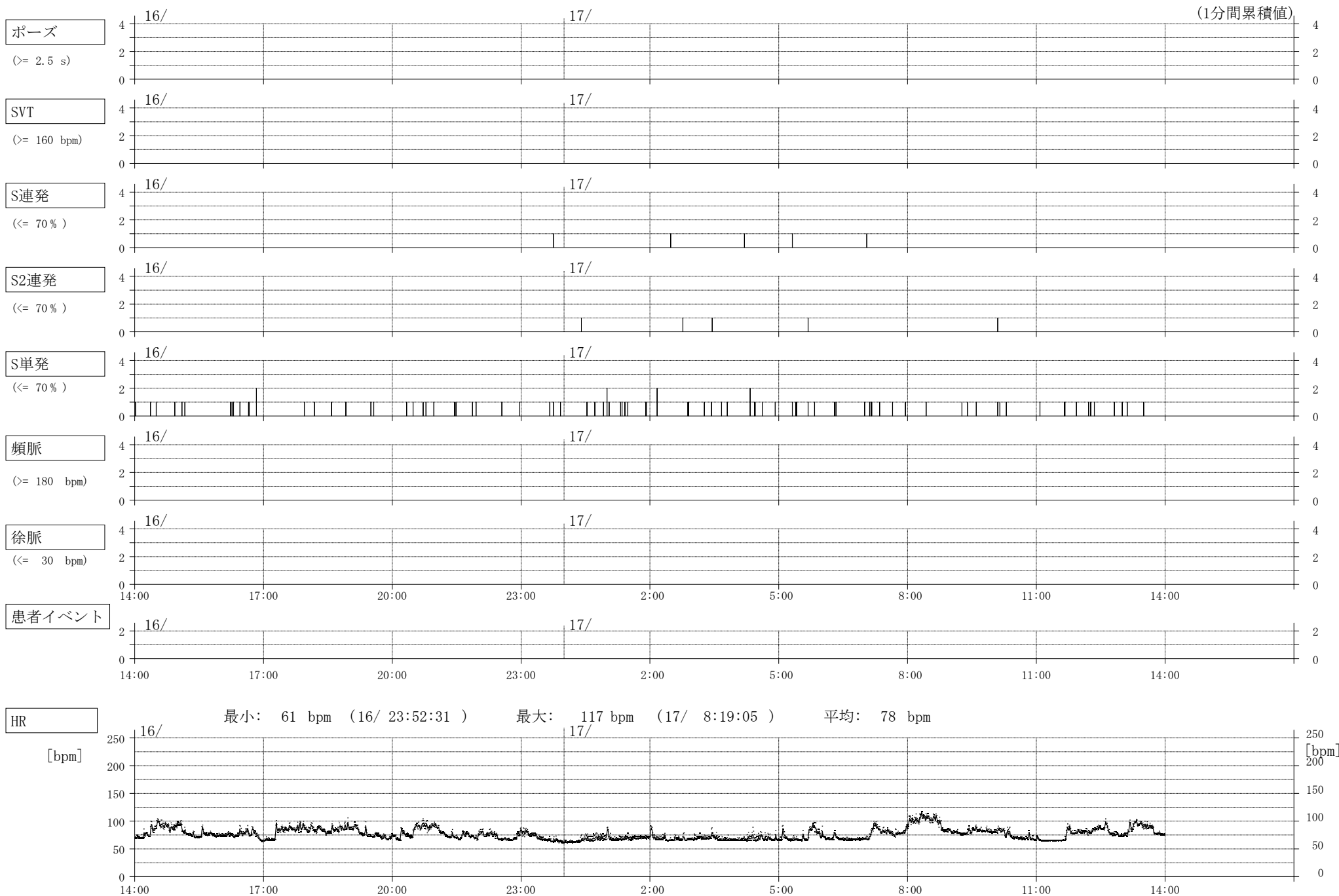

不整脈ヒストグラム

2025/08/27

氏名: ソウゴウ タロウ

P20


ID : 12345678

13/15頁

解析時間 2025/08/13 13:50:50 - 2025/08/18 10:34:19 (4d20h38min56s)


心室期外収縮

総数 : 263 beats (0.269 %)

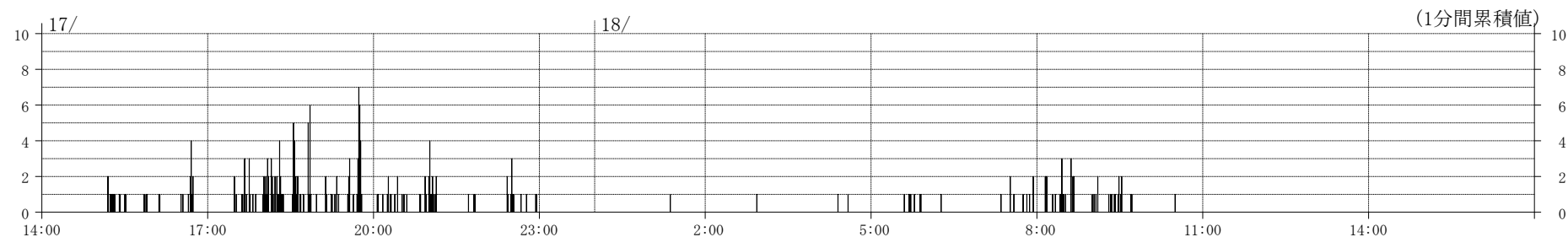


上室期外収縮

総数 : 130 beats (0.133 %)

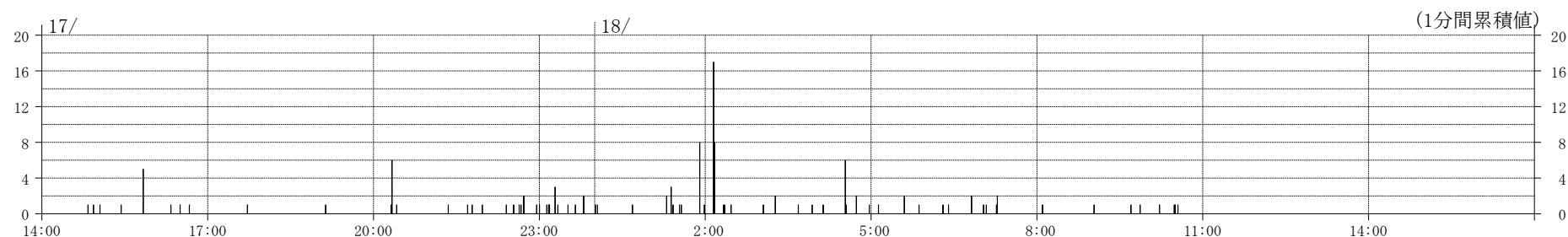


HR

最小: 60 bpm (17/ 23:51:03) 最大: 122 bpm (17/ 20:35:27) 平均: 75 bpm

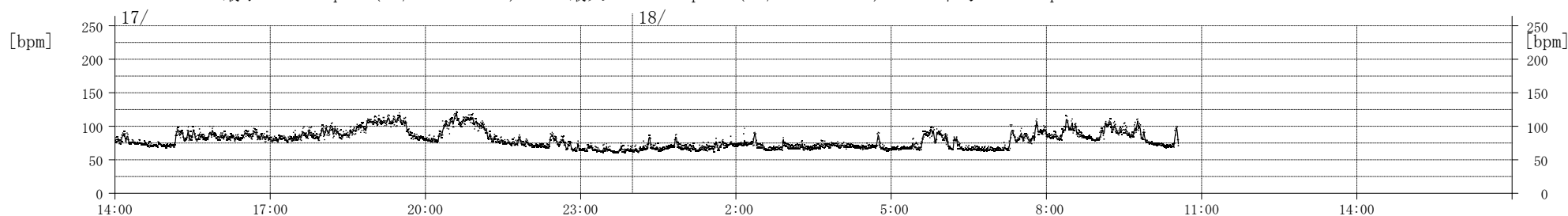

心房細動

イベント数: 0 総持続時間: 0s (0.00 %) 最大HR: bpm

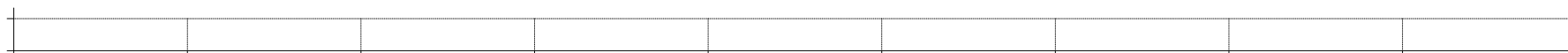


雑音

ch. 1

ch. 2

ch. 3

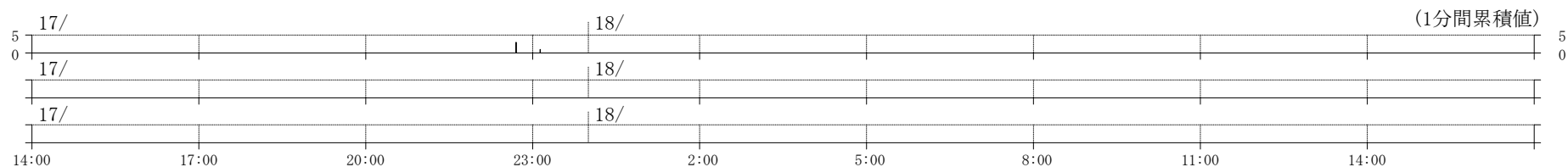

不整脈ヒストグラム

2025/08/27

氏名: ソウゴウ タロウ

P21

ID : 12345678


14/15頁

心室性不整脈イベント

解析時間 2025/08/13 13:50:50 - 2025/08/18 10:34:19 (4d20h38min56s)


VT(持続性)

(>= 100 bpm)

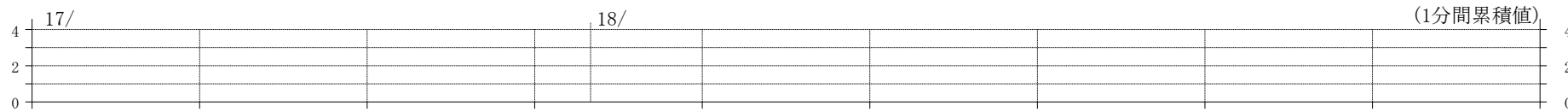


VT(非持続性)


(>= 100 bpm)

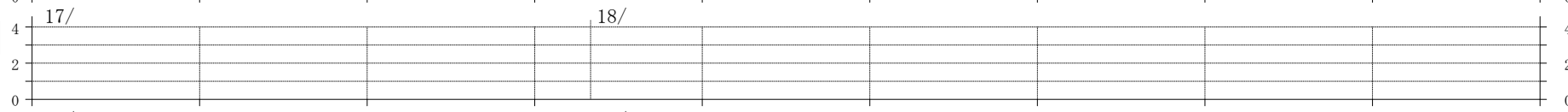

V連発

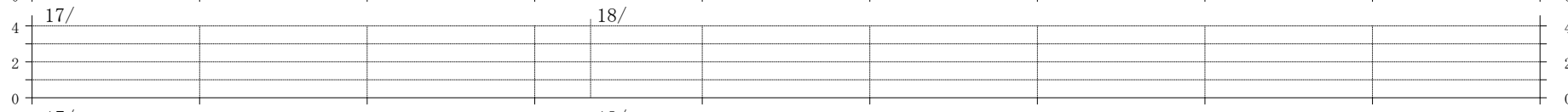


V2連発

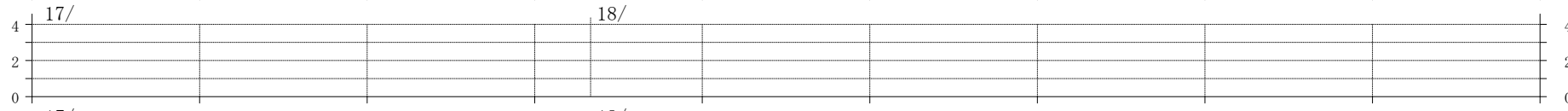


R on T


(<= 250 ms)

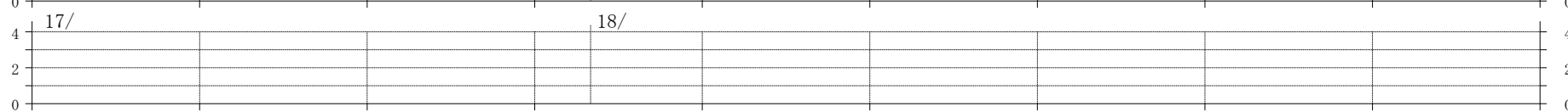


V2段脈

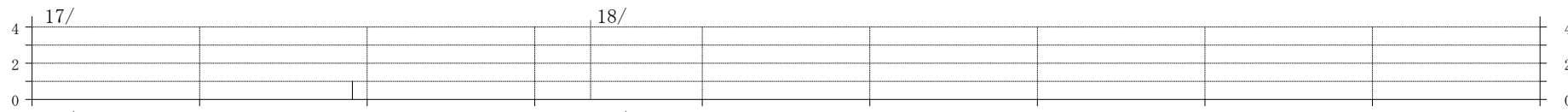


V3段脈

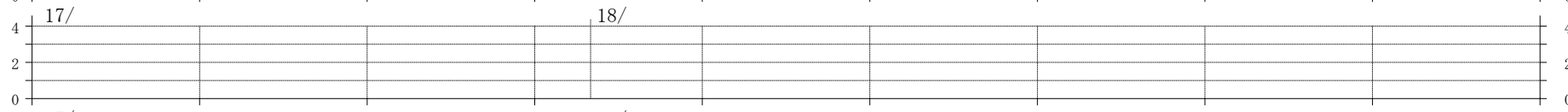

V単発

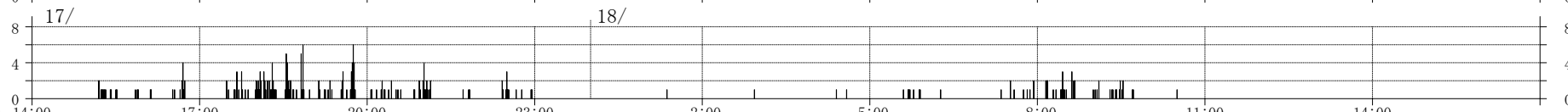


患者イベント

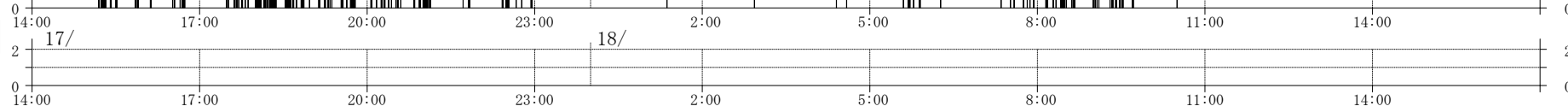

HR

[bpm]

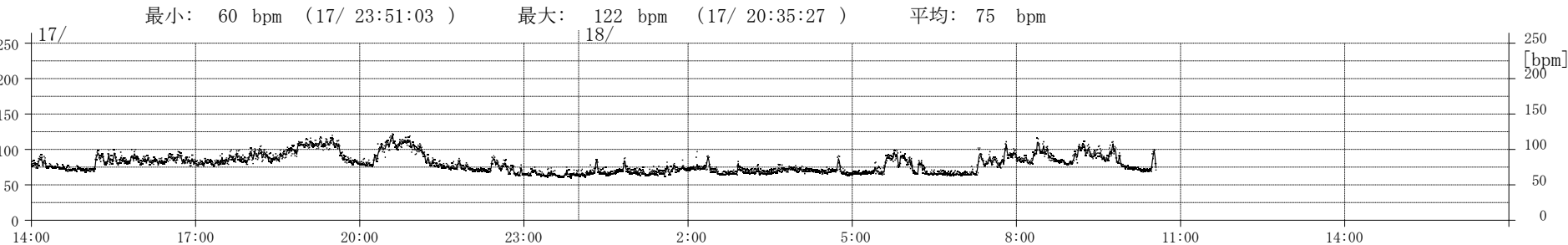

不整脈ヒストグラム

2025/08/27

氏名: ソウゴウ タロウ


P22

ID : 12345678

15/15頁

上室性不整脈イベント

解析時間 2025/08/13 13:50:50 - 2025/08/18 10:34:19 (4d20h38min56s)

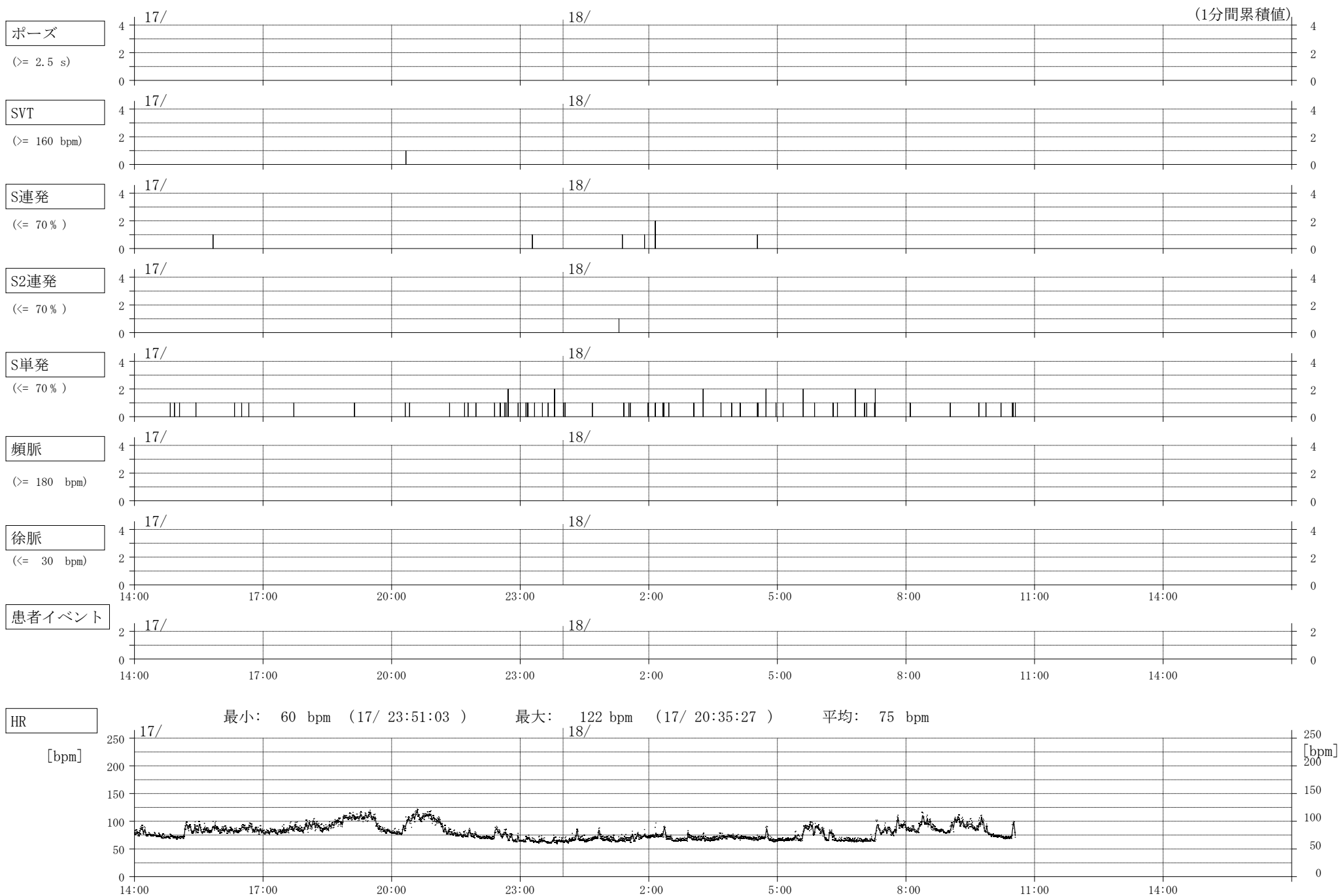

解析時間

2025/08/13 13:50:50

-

2025/08/18 10:34:19

(4d20h38min56s)

イベント数

:

3

平均HR

最小:

163 bpm

総持続時間

:

0h 0min 3s

(0.00 %)

平均:

167 bpm

1日あたりの平均持続時間

:

0h 0min 0s

最大:

170 bpm

最大持続時間

:

0h 0min 1s

(17/ 20:19:48)

平均HR (Sinus)

最小:

74 bpm

最大HR

:

170 bpm


(15/ 19:47:18)

平均:

77 bpm

最大:

82 bpm

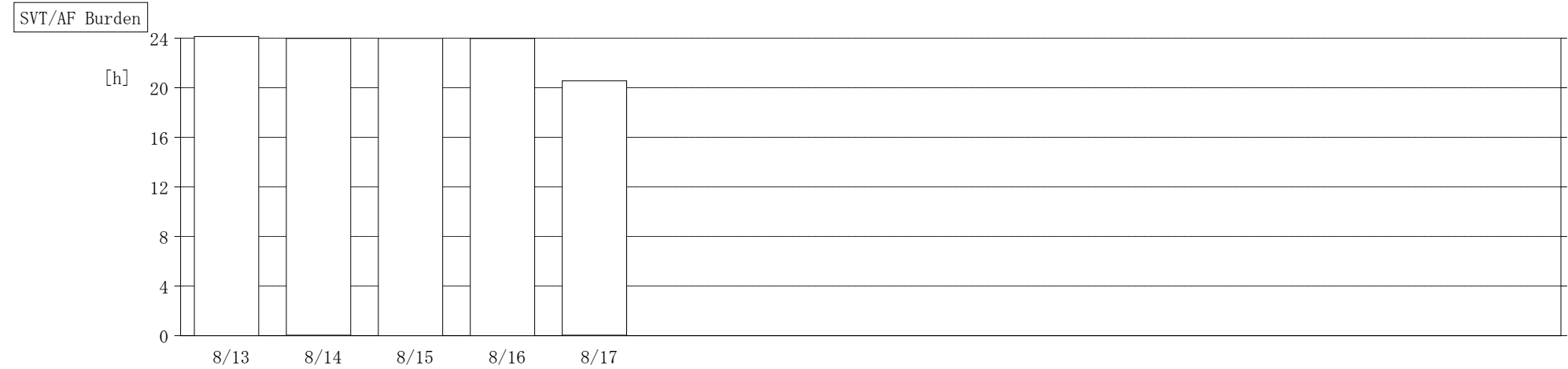

イベント数		1	1		1										
総持続時間		0:00:01	0:00:00		0:00:01										
有効解析時間	24:08:17	23:59:01	23:59:11	23:58:50	20:33:36										
SVT/AFの割合 [%]		0.00	0.00		0.00										
最大持続時間		0:00:01	0:00:00		0:00:01										
最大HR [bpm]		163	170		169										
平均HR [bpm]		163	170		169										
平均HR (Sinus) [bpm]	82	77	76	74	78										

SVT/AFの割合 = 100 × 総持続時間 / 有効解析時間

解析時間 2025/08/13 13:50:50 - 2025/08/18 10:34:19 (4d20h38min56s)

イベント数 : 3

総持続時間 : 0h 0min 3s (0.00 %)

1日あたりの平均持続時間 : 0h 0min 0s

最大持続時間 : 0h 0min 1s (17/ 20:19:48)

最大連発数 : 6 beats (17/ 20:19:48)

最大HR : 170 bpm (15/ 19:47:18)

平均HR

最小: 163 bpm

平均: 167 bpm

最大: 170 bpm

平均HR (Sinus)

最小: 74 bpm

平均: 77 bpm

最大: 82 bpm

SVT Burden



イベント数		1	1		1										
総持続時間		0:00:01	0:00:00		0:00:01										
有効解析時間	24:08:17	23:59:01	23:59:11	23:58:50	20:33:36										
SVTの割合 [%]		0.00	0.00		0.00										
最大持続時間		0:00:01	0:00:00		0:00:01										
最大連発数 [beats]		5	3		6										
最大HR [bpm]		163	170		169										
平均HR [bpm]		163	170		169										
平均HR (Sinus) [bpm]	82	77	76	74	78										

SVTの割合 = 100 × 総持続時間 / 有効解析時間

登録番号	開始時間	HR [bpm]	コメント
1	15/ 19:59:25	125	最大HR125bpm
2	15/ 23:46:42	60	最小HR60bpm
3	13/ 14:55:30	101	V3段脈7beats
4	13/ 17:45:24	79	S単発
5	13/ 17:47:15	83	V単発
6	14/ 7:41:56	85	S連発
7	14/ 10:57:20	65	S2連発
8	14/ 11:14:30	64	V単発
9	14/ 19:00:49	98	V単発
10	14/ 20:07:03	98	V2段脈7beats
11	14/ 22:40:44	69	S単発
12	15/ 6:38:39	79	S連発
13	15/ 8:36:30	105	SVT163bpm
14	15/ 9:42:41	88	S連発
15	15/ 11:56:14	89	S連発
16	15/ 17:39:38	95	V2段脈5beats
17	15/ 19:47:13	95	SVT170bpm
18	15/ 19:50:00	95	最大HR付近
19	16/ 10:09:17	65	S単発60%
20	17/ 5:40:11	69	S2連発
21	17/ 20:19:43	97	SVT169bpm
22	17/ 23:19:29	67	心室内変行伝導
23	18/ 1:53:39	80	S連発
24	18/ 2:08:49	75	心室内変行伝導を伴うS連発
25	18/ 10:32:03	80	S単発

以上

← 検査日順に登録波形一覧がみれます

登録波形

2025/08/27

氏名: ソウゴウ タロウ

P26

ID : 12345678

1/15頁

登録 1

15/ 19:59:25

コメント: 最大HR

125bpm

25.0mm/s

125bpm

ch. 1
X 1
+0.00mV



登録 2

15/ 23:46:42

コメント: 最小HR

60bpm

25.0mm/s

60bpm

ch. 1
X 1
+0.00mV



登録波形

2025/08/27

氏名: ソウゴウ タロウ

P27

ID : 12345678

2/15頁

登録 3

13/ 14:55:30

コメント: V3段脈

7beats

25.0mm/s

101bpm

ch. 1
X 1
+0.00mV



登録 4

13/ 17:45:24

コメント: S単発

25.0mm/s

79bpm

ch. 1
X 1
+0.00mV



登録波形

2025/08/27

氏名: ソウゴウ タロウ

P28

ID : 12345678

3/15頁

登録 5

13/ 17:47:15

コメント: V単発

25.0mm/s

83bpm

ch. 1
X 1
+0.00mV



登録 6

14/ 7:41:56

コメント: S連発

25.0mm/s

85bpm

ch. 1
X 1
+0.00mV



登録 7

14/ 10:57:20

コメント: S2連発

25.0mm/s

65bpm

ch. 1
X 1
+0.00mV

登録 8

14/ 11:14:30

コメント: V単発

25.0mm/s

64bpm

ch. 1
X 1
+0.00mV



登録波形

2025/08/27

氏名: ソウゴウ タロウ

P31

ID : 12345678

6/15頁

登録 11

14/ 22:40:44

コメント: S単発

25.0mm/s

69bpm

ch. 1
X 1
+0.00mV



登録 12


15/ 6:38:39

コメント: S連発

25.0mm/s

79bpm

ch. 1
X 1
+0.00mV

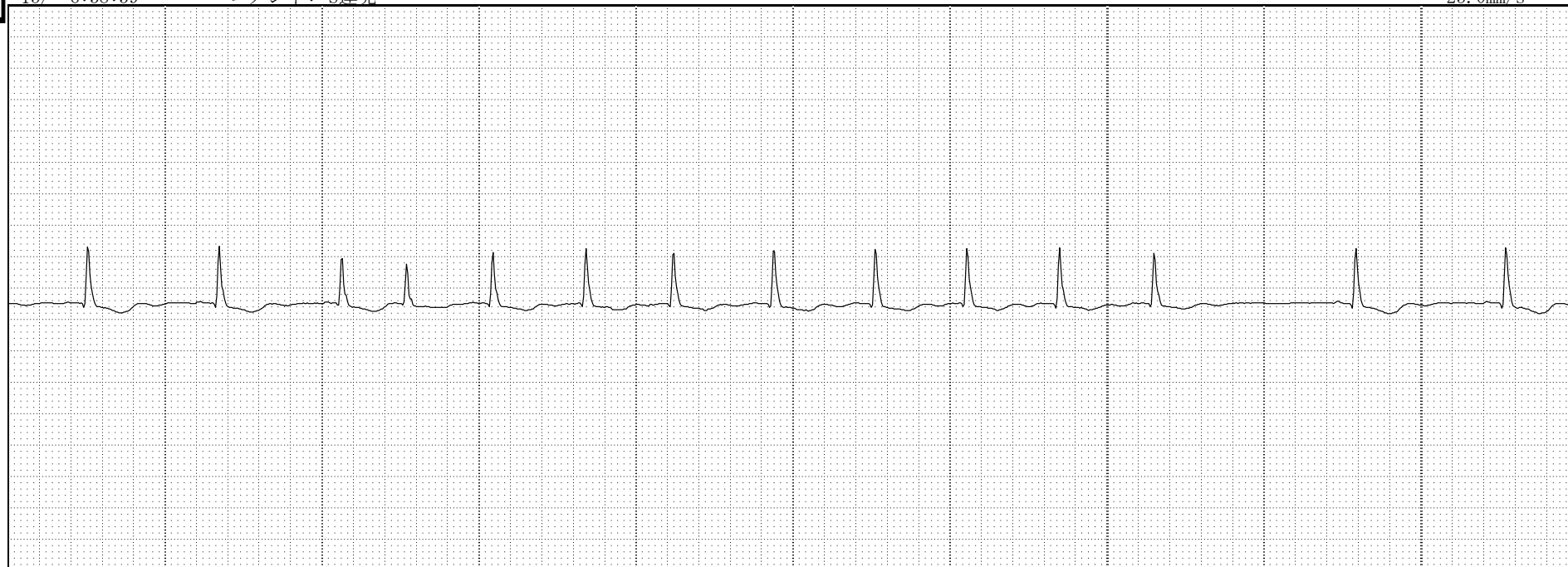

登録 13


15/ 8:36:30

コメント: SVT

163bpm

25.0mm/s

105bpm

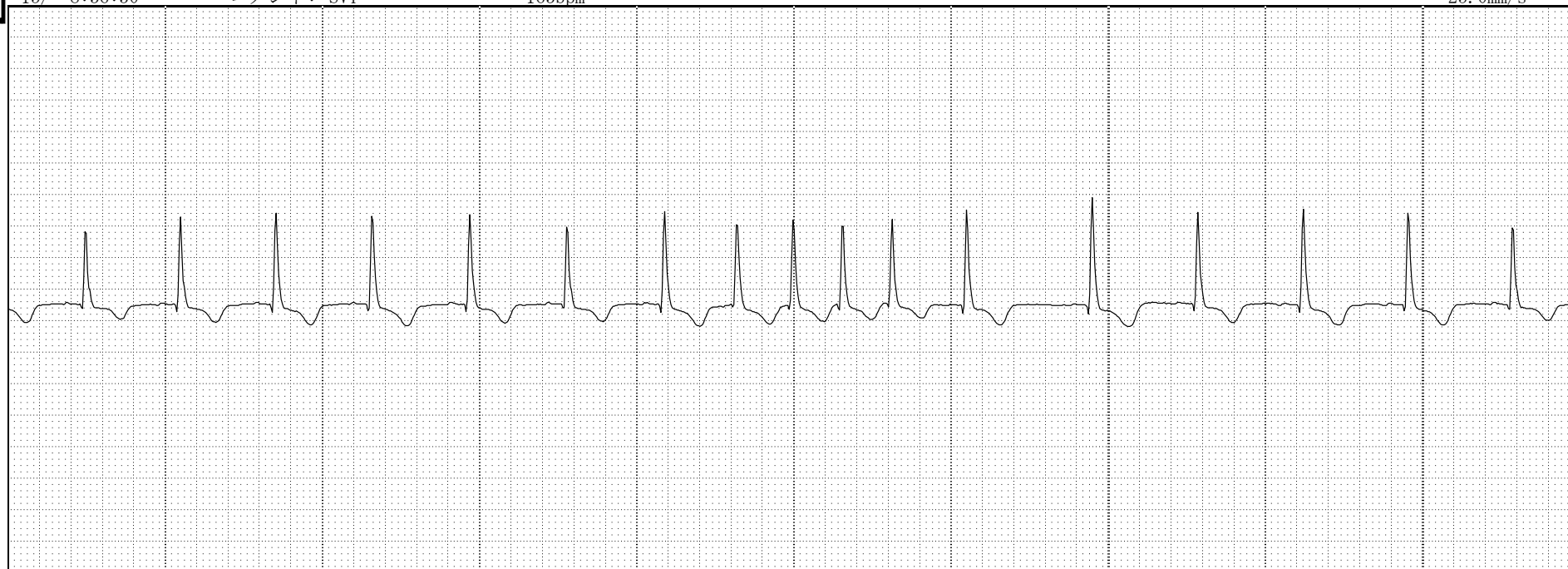ch. 1
X 1
+0.00mV


登録 14

15/ 9:42:41

コメント: S連発

25.0mm/s

88bpm

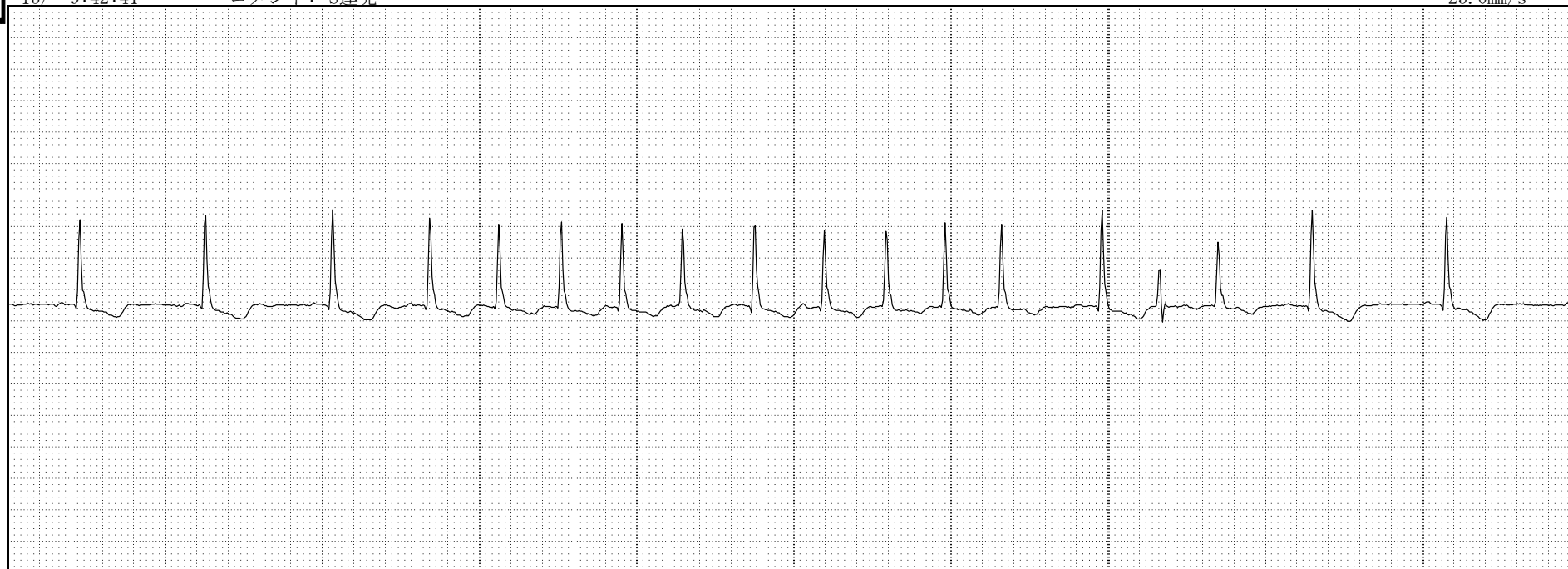ch. 1
X 1
+0.00mV


登録 15

15/ 11:56:14

コメント: S連発

25.0mm/s

89bpm

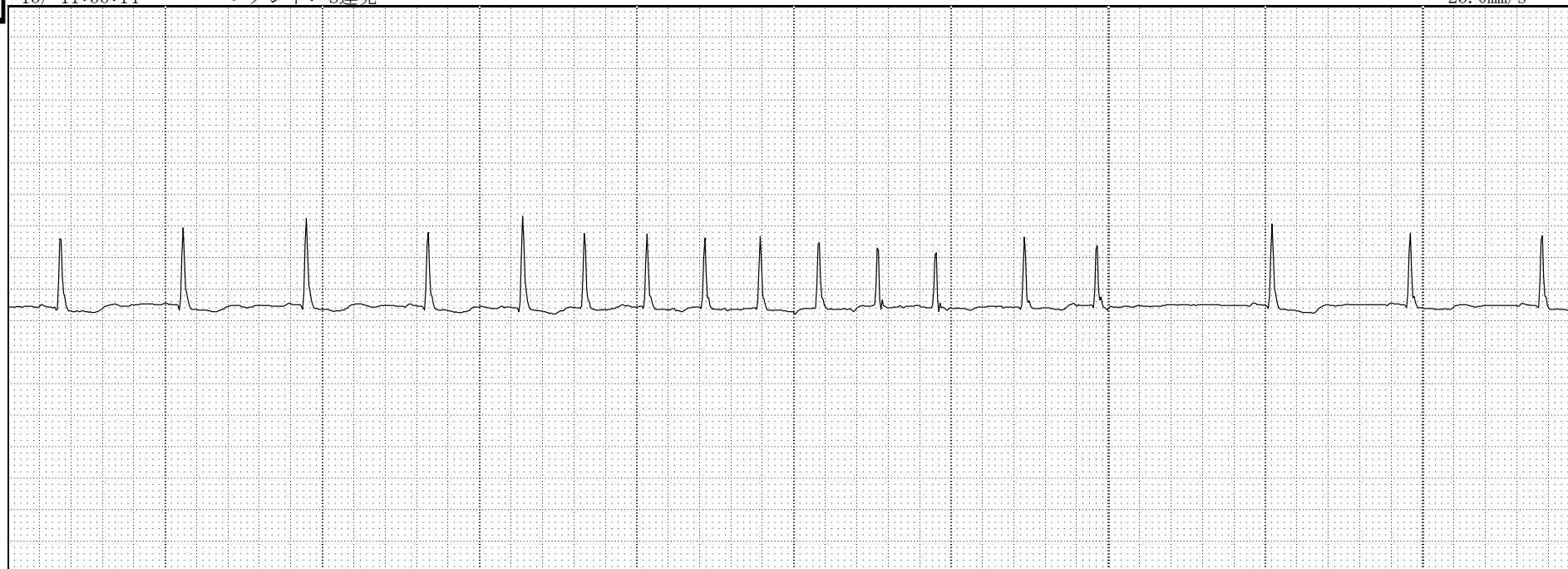ch. 1
X 1
+0.00mV

登録 16

15/ 17:39:38

コメント: V2段脈

5beats

25.0mm/s

95bpm

ch. 1
X 1
+0.00mV

登録 17

15/ 19:47:13

コメント: SVT



170bpm

25.0mm/s

95bpm

ch. 1
X 1
+0.00mV



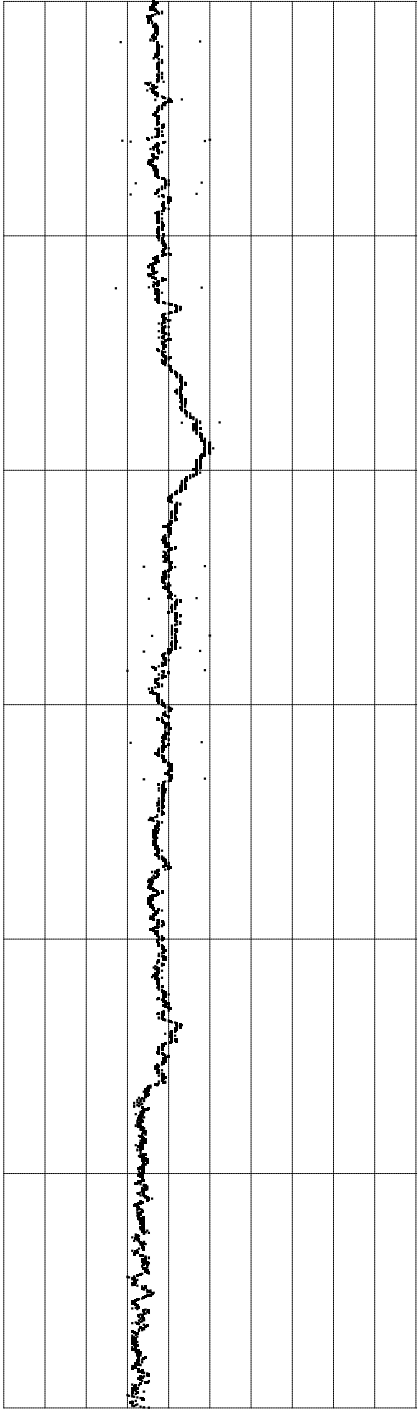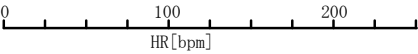

登録 18

ch. 1

[1min/Line(30min/頁)]

10/15頁

2025/08/27


氏名:

ソウゴウ タロウ

P35

コメント:

最大HR付近

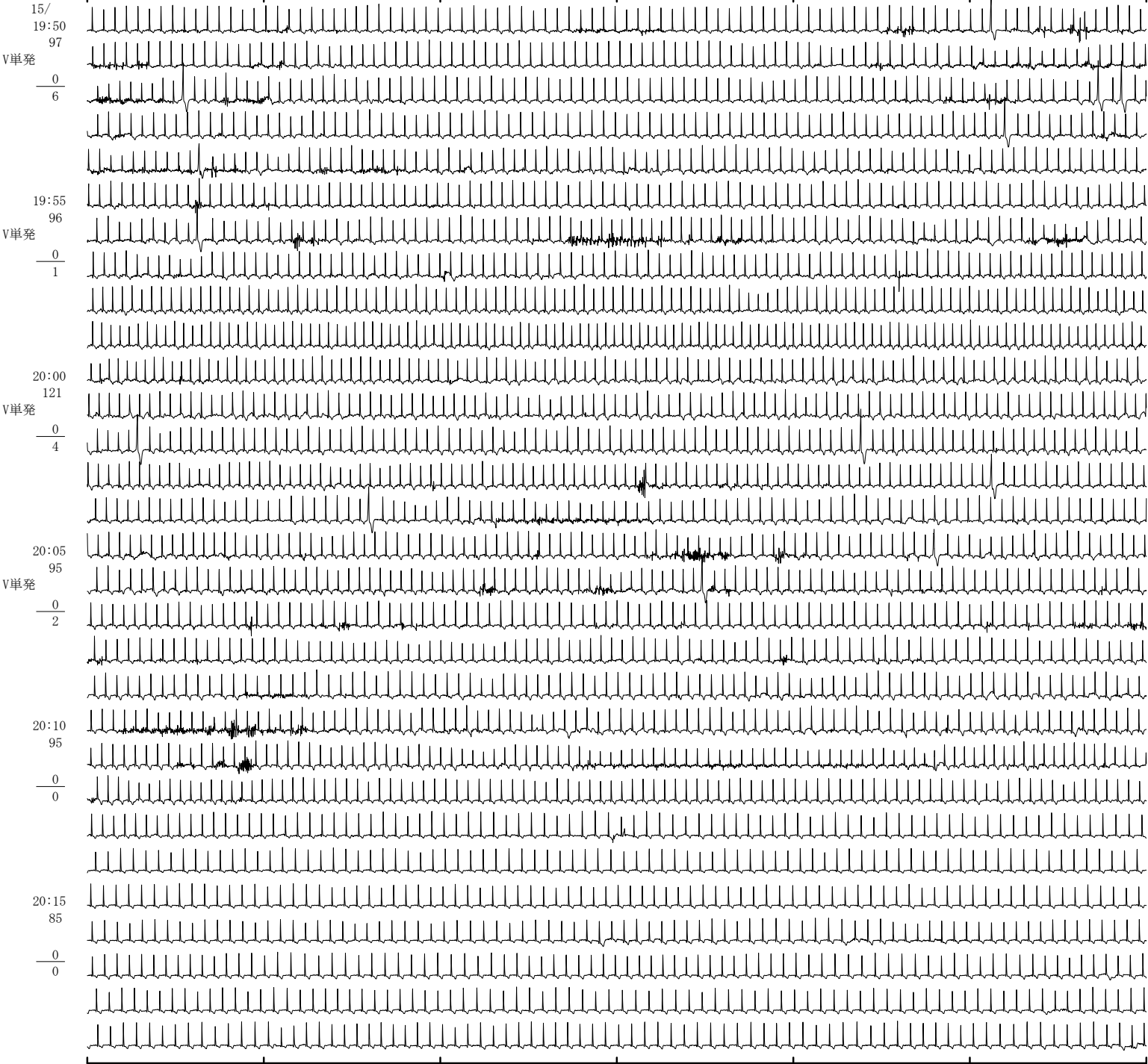

登録 19

16/ 10:09:17

コメント: S単発

60%

25.0mm/s

65bpm

ch. 1
X 1
+0.00mV

登録 20

17/ 5:40:11

コメント: S2連発

25.0mm/s

69bpm

ch. 1
X 1
+0.00mV

登録 21

17/ 20:19:43

コメント: SVT

169bpm

25.0mm/s

97bpm

ch. 1
X 1
+0.00mV

登録 22

17/ 23:19:29

コメント: 心室内変行伝導

25.0mm/s

67bpm

ch. 1
X 1
+0.00mV


登録 23

18/ 1:53:39

コメント: S連発

25.0mm/s

80bpm

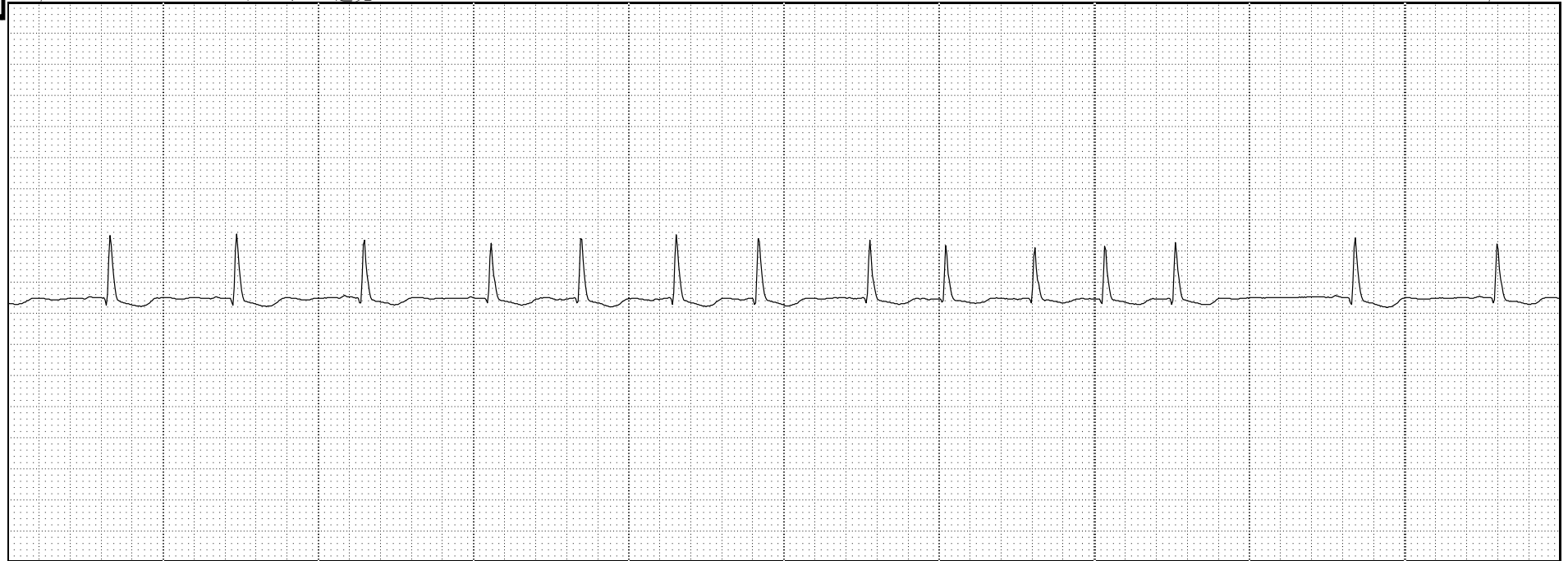ch. 1
X 1
+0.00mV

登録 24

18/ 2:08:49

コメント: 心室内変行伝導を伴うS連発

25.0mm/s

75bpm

ch. 1
X 1
+0.00mV

18/ 2:08:59

92bpm

ch. 1
X 1
+0.00mV

登録 25

18/ 10:32:03

コメント: S単発

25.0mm/s

80bpm

ch. 1
X 1
+0.00mV



記録・再生情報

○記録器名: WR-100 (V01-03)
○記録器シリアルNo.: 50001148
○記録時間: 2025/08/13 13:50:50 ~
2025/08/18 10:34:19
[116h43min29s]
○入力信号: ECG
○極性反転: 無
○誘導名:
○記録終了要因: ユーザー強制終了
○電池電圧: 開始3.1V、終了2.9V

解析・計測設定

○解析詳細
モフォロジー分類 → 簡易
ノイズ強度設定 → 普通
T波マスク時間 → 300 ms
○不整脈閾値
ポーズ → ≥ 2.5 s
VT → ≥ 100 bpm
R on T → ≤ 250 ms
SVT → ≥ 160 bpm
頻脈 → ≥ 180 bpm
徐脈 → ≤ 30 bpm
上室期外収縮 → ≤ 70 %
○ST設定
レベル基準点 → 80 ms
スロープ基準点 → 56 ms
計測点 → 96 ms
ST上昇 → 0.20 mV
ST下降 → 0.10 mV
持続時間 → 1 min 0 s
○ペースメーカー閾値
ペース心拍 → -300 - -60 ms
フュージョン → -60 - 10 ms

印刷設定

○表紙
○報告書
○解析結果概要
○不整脈レポート
不整脈発生表
不整脈ヒストグラム
○心房細動レポート
○登録波形
○機器情報レポート

その他

○テーブル設定初期値
病院 →
病棟 →
科 →
医師 →
判読医 →
技師1 →
技師2 →
○被検者データ管理
フォルダ管理 → OFF
データの消去法 → OFF
簡易結果DB登録 → OFF
○自動登録波形
不整脈イベント → 4
SASイベント → ON
被検者イベント → 10
定時イベント → OFF
被検者イベント登録名称
→ 0
○オーダー情報表示 → OFF
○検査状態更新
事前登録 → 検査中
属性取得 → 検査済
○互換設定
L→Q, R→Q, W→Q, @→Q
Y→Q, Z→Q, C→Q, G→Q
J→Q, H→Q, K→Q

解析情報

○解析バージョン → V05-02
○解析チャネル → [ch. 1]
○ST計測チャネル →
○R波検出感度 → 拡大
○ペースメーカー使用 → OFF

機器情報

○ソフトウェアバージョン : V93-04
○プリンタ : Kyocera 手前
○ファイル番号 : 495